SuperNova

Ampliador

Versión 23

Dolphin Computer Access

CE MD

Fecha de publicación: 04 April 2024

Copyright ©1998-2024 Dolphin Computer Access Ltd.

Technology House
Blackpole Estate West
Worcester WR3 8TJ
Reino Unido
Tel.: +44 (0) 1905 754577
Fax: +44 (0) 1905 754559

Todos los derechos reservados en todo el mundo.

CAPÍTULO 1

Instalación y configuración

1.1 Iniciar SuperNova

SuperNova se iniciará automáticamente después de que inicie sesión en el equipo, a menos que haya indicado lo contrario durante el proceso de instalación.

Puede iniciar manualmente SuperNova después de iniciar sesión usando la tecla de método abreviado de SuperNova.

Presione CONTROL + MAYÚS + S.

Si ha instalado una nueva versión junto a la versión existente, se asignará automáticamente a la nueva versión la siguiente tecla de método abreviado:

Presione CONTROL + MAYÚS + D.

También puede iniciar SuperNova seleccionando el acceso directo de SuperNova en el menú Inicio de Windows. Lo encontrará en Programas, en el submenú Dolphin.

1.2 Ejecutar SuperNova por primera vez

La primera vez que ejecute SuperNova después de la instalación se le guiará a lo largo del proceso de activación.

El proceso de activación le guiará a través del desbloqueo y la activación de su software.

1.3 Salir de SuperNova

Para salir de SuperNova:

1. Presione CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA. Se abrirá el panel de control de SuperNova.

2. Presione ALT + A. Se abrirá el menú "Archivo".


3. Presione FLECHA ABAJO hasta "Salir de SuperNova" y presione INTRO. Se mostrará una ventana de mensaje solicitándole que confirme que desea salir.

4. Presione TAB hasta el botón "Sí" y presione BARRA ESPACIADORA.

CAPÍTULO 2

Panel de control de SuperNova

2.1 Introducción al panel de control de SuperNova

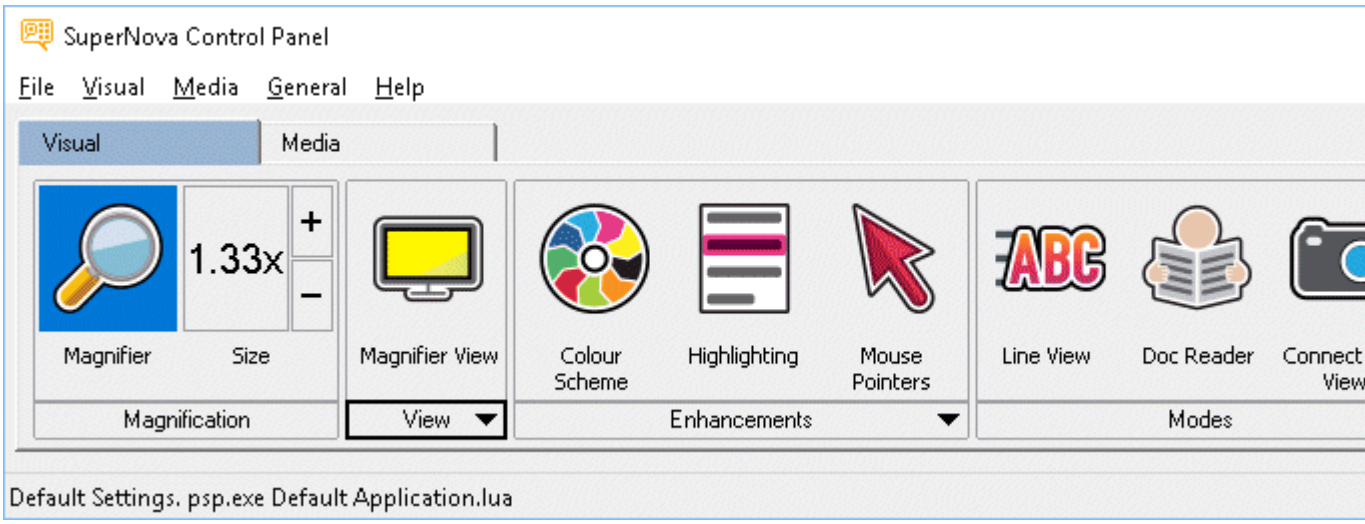

En el panel de control de SuperNova se encuentran todas las opciones de configuración de SuperNova.

Puede acceder a la configuración de SuperNova desde las barras de botones y menús del panel de control.

La barra de menús (la barra horizontal que se muestra debajo de la barra de título con las opciones de los menús desplegables) ofrece acceso a todas las opciones de configuración disponibles de SuperNova. La barra de botones (que se muestra debajo de la barra de menús con botones de gran tamaño de fácil acceso) ofrece acceso a las opciones de configuración de SuperNova que se usan con mayor frecuencia.

La última sección del panel de control de SuperNova la constituye la barra de estado. La barra de estado (la barra horizontal que se muestra en la parte inferior del panel de control de SuperNova) ofrece información sobre los archivos de configuración que utiliza.

Puede pasar de una versión de tamaño completo a una compacta del panel de control presionando los botones de restauración y maximización en la barra del título del panel de control.

El panel de control de SuperNova puede abrirse de varias formas. Use la que mejor se adapte a sus necesidades.

Para abrir el panel de control principal de SuperNova:

Presione CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA.

Así se abrirá por completo el panel de control como un cuadro de diálogo.


Si prefiere abrir el panel de control de SuperNova

con el mouse:

Haga clic en el icono de SuperNova en el área de notificación de Windows.

Para abrir el panel de control de SuperNova como un menú corriente:

Presione BLOQ MAYÚS + BARRA ESPACIADORA o HAGA CLIC CON EL BOTÓN SECUNDARIO en el icono de SuperNova, en el área de notificación de Windows.

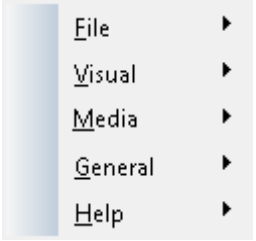

2.2 Comandos de teclado para desplazarse por el panel de control de SuperNova

Las tablas siguientes contienen una lista de comandos de teclado que le ayudarán a desplazarse por el panel de control de SuperNova. Tenga en

cuenta que estos comandos de teclado también son comandos estándar de Windows que puede usar en este sistema operativo.

Comandos de teclado para la barra de menús.

Función	Tecla de acceso rápido
Mover el foco a la barra de menús	ALT
Mover el foco por la barra de menús	FLECHA IZQUIERDA o FLECHA DERECHA
Abrir el elemento del menú que tiene el foco	FLECHA ABAJO o ENTRAR
Ir a un elemento de la barra de menús y abrirlo	ALT + Letra subrayada
Moverse por un menú abierto	FLECHA ABAJO o FLECHA ARRIBA
Abrir un submenú	FLECHA DERECHA o ENTRAR
Cerrar un submenú	FLECHA IZQUIERDA o ESCAPE
Seleccionar un elemento del menú	ENTRAR

Comandos de teclado para cuadros de diálogo

Función	Tecla de acceso rápido
Ir al control siguiente	TAB
Ir al control anterior	MAYÚS + TAB
Presionar un botón, activar y desactivar una casilla de verificación o seleccionar una opción	BARRA ESPACIADORA
Ir directamente a un control	ALT + Letra subrayada
Abrir la ficha siguiente en un cuadro de diálogo con varias fichas	CONTROL + TAB

Abrir la ficha anterior en un cuadro de diálogo con varias fichas	CONTROL + MAYÚS + TAB
Cancelar	ESCAPE

2.3 Ajustes en el Panel de Control SuperNova

Se puede acceder a todas las opciones de SuperNova a través de los menús del Panel de Control de SuperNova. La siguiente lista resume el objetivo de los menús:

- Menú "File" (Archivo):

  El menú "File" (Archivo) contiene opciones para seleccionar su perfil de usuario, así como para gestionar sus archivos de ajustes de SuperNova. Esto incluye crear, editar, importar y exportar archivos de ajustes. El menú "File" también contiene el comando para salir de SuperNova.

- Menú Visual

  El menú Visual contiene opciones para controlar el Ampliador, los colores de pantalla, el realce y otros efectos visuales. También puede acceder a muchas de estas opciones desde la barra de botones de SuperNova.

- Menú "Media" (Multimedia).

  El menú "Media" (Multimedia) contiene opciones para escanear, buscar libros, leer artículos de noticias online, escuchar emisoras de radio y reproducir podcasts.

- Menú General

  El menú General contiene opciones que controlan el comportamiento de SuperNova, incluidas las preferencias de inicio, la configuración de actualización, el aspecto del panel de control y las asignaciones entre las teclas de acceso rápido y teclado de SuperNova.

- Menú Ayuda

El menú Ayuda ofrece acceso directo a recursos de utilidad, como el manual de SuperNova, otros recursos en línea y la opción Acerca de. La opción Acerca de ofrece el número de identificación del cliente y la edición, la versión y la compilación de SuperNova que se está ejecutando actualmente. Asegúrese de tener cerca esta información si solicita asistencia técnica.

2.4 Cambiar el aspecto del panel de control de SuperNova

En el panel de control de SuperNova puede realizar muchos cambios. Por ejemplo, puede ocultar las barras de botones y estado, impedir que el panel de control aparezca cuando ejecute SuperNova o quitarlo de la barra de tareas de Windows.

Para obtener más información sobre cómo realizar cambios en el panel de control de SuperNova, consulte el cuadro de diálogo Panel de control general.

2.5 Cerrar el panel de control de SuperNova

El panel de control de SuperNova puede cerrarse de varias formas.

Para hacerlo:

Presione ESCAPE.

O bien:

Haga clic en el icono de minimizar de la barra de título del panel de control de SuperNova.

El panel de control de SuperNova desaparecerá de forma inmediata y el foco cambiará a la aplicación que se estaba ejecutando anteriormente. SuperNova continuará ejecutándose.

NOTA: Si presiona ALT + F4 o hace clic en el botón de cerrar de la barra de título del panel de control de SuperNova, SuperNova entenderá que desea salir del programa. Antes de salir, una ventana de mensaje le solicitará que confirme la acción.

CAPÍTULO 3

Ampliador

3.1 Activar y desactivar el Magnificador




Puede activar o desactivar el Magnificador con las teclas de acceso rápido o las opciones de Visual del panel de control de SuperNova. Si usa un dispositivo con pantalla táctil, también puede activar o desactivar el Magnificador con una pulsación doble con 3 dedos.

Teclas de acceso rápido del Magnificador

Función	Ordenador de sobremesa: conjunto de teclado numérico predeterminado	Portátil: conjunto universal
Activar o desactivar el Magnificador	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM INTRO	ALT + 0

Si está utilizando varios monitores y ha activado la casilla de verificación "Permitir diferentes tipos de ampliación en cada monitor" en el cuadro de diálogo de configuración de "Varios monitores" de SuperNova, se activará o desactivará el Magnificador solo en el monitor en el que se encuentra el cursor del ratón cuando presione la tecla de acceso rápido de encendido/apagado del Magnificador.

3.2 Cambiar la medida del Magnificador

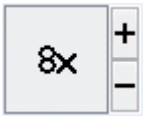

Puede cambiar la medida del Magnificador desde 1,2x hasta 64x. Para hacerlo, use las teclas de acceso rápido o las opciones de "Visual" del panel de control de SuperNova. Si usa un dispositivo con pantalla táctil, también puede cambiar el Magnificador con reducir con 2 dedos o expandir con 2 dedos.

Teclas de acceso rápido del Magnificador

Función	Teclas de acceso rápido de ordenadores de sobremesa	Portátil: conjunto universal
Aumentar el Magnificador	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM MÁS o BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ARRIBA	ALT + IGUAL o BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ARRIBA
Reducir el Magnificador	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM MENOS o BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ABAJO	ALT + GUIÓN o BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ABAJO

Si está utilizando varios monitores y ha activado la casilla de verificación "Permitir diferentes tipos de ampliación en cada monitor" en el cuadro de diálogo de configuración de "Varios monitores" de SuperNova, se aumentará o reducirá el Magnificador solo en el monitor en el que se encuentra el cursor del ratón cuando presione las teclas de aumento o reducción del Magnificador.

3.3 Cambiar la Vista de Magnificador



Puede seleccionar diferentes formas de ver la pantalla utilizando el Magnificador de SuperNova. Las opciones de visualización son las siguientes:

- Pantalla completa.
  Esta vista llena toda la pantalla con una parte de la pantalla de Windows "real" magnificada.

- Ventana fija.
  Esta vista muestra la región magnificada de la pantalla en una ventana estática pequeña. Puede cambiar la medida y la posición de la ventana.

- Magnificación de la lente
  El resultado de esta vista es como sujetar una lupa sobre la pantalla. Esta vista muestra la región magnificada de la pantalla en una ventana pequeña que se va moviendo. Puede cambiar la medida y la posición de la ventana.

- Medida de la lente
  El resultado de esta vista es similar al de Magnificación de la lente, con la diferencia de que la ventana magnificada cambia automáticamente de medida para adaptarse al foco actual. Esta vista es útil cuando se utiliza el teclado para moverse por Windows y resulta más cómodo ver la pantalla no aumentada en el fondo.

- Pantalla dividida.
  Esta vista divide la pantalla en dos regiones: una ventana magnificada y otra, no magnificada. Se puede especificar la posición y la medida de la ventana magnificada. El borde entre la ventana magnificada y la no magnificada consiste en una línea negra. Este modo se utiliza con frecuencia con los paquetes de CCTV integrados.

Puede apagar o encender el magnificador utilizando las opciones "Visuales" del Panel de control de SuperNova o utilizando las teclas de acceso rápido.

Teclas de acceso rápido del Magnificador

Función	Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado	Portátil: Conjunto universal
Cambiar la Vista de Magnificador	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 7	ALT + MAYÚS + M
Cambiar la orientación en la vista Pantalla dividida	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 1	Sin asignación

Recuerde que puede cambiar la medida y el color del borde de las vistas Ventana fija, Magnificación de la lente, Medida de la lente y Pantalla dividida. Se cambia desde el cuadro de diálogo "Opciones avanzadas visuales".

3.4 Cambiar la medida y la posición de la ventana magnificada

Puede cambiar la medida y la posición de la ventana de Ventana fija, Magnificación de la lente y Pantalla dividida. Los cambios se pueden realizar utilizando un modo de modificación de la magnificación.

Para ajustar la medida y la posición de la vista Ventana fija:

1. Seleccione "Ventana fija" en la opción de configuración "Vista de Magnificador".

2. Si está utilizando la configuración de teclas de acceso rápido de equipos de escritorio, presione CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 4 para cambiar al modo de modificación de la magnificación. Si utiliza la configuración para equipos portátiles, presione CONTROL DERECHO + F3 para cambiar al modo de modificación de la magnificación.

   En el modo de modificación de la magnificación, el borde parpadea para indicar el objeto que se está editando.

3. Utilice las teclas de flecha para colocar la ventana en la pantalla. También puede hacerlo manteniendo pulsada la tecla Z y moviendo el mouse.

4. Presione CONTROL IZQUIERDO + teclas de flecha para ajustar la medida de la ventana. También puede hacerlo manteniendo pulsada la tecla X y moviendo el mouse.

5. Presione ESCAPE para salir del modo de modificación de la magnificación.

Para ajustar la medida de la vista Magnificación de la lente:

1. Seleccione "Magnificación de la lente" en la configuración de Vista de Magnificador.

2. Si está utilizando la configuración de teclas de acceso rápido de equipos de escritorio, presione CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 4 para cambiar al modo de modificación de la magnificación. Si utiliza la configuración para equipos portátiles, presione CONTROL DERECHO + F3 para cambiar al modo de modificación de la magnificación.

   En el modo de modificación de la magnificación, el borde parpadea para indicar el objeto que se está editando.

3. Presione CONTROL IZQUIERDO + teclas de flecha para ajustar la medida de la ventana. También puede hacerlo manteniendo pulsada la tecla X y moviendo el mouse.

4. Presione ESCAPE para salir del modo de modificación de la magnificación.

Para ajustar la medida de la vista Pantalla dividida:

1. Seleccione la orientación de la Pantalla dividida que va a utilizar en la configuración de Vista de Magnificador.

2. Si está utilizando la configuración de teclas de acceso rápido de equipos de escritorio, presione CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 4 para cambiar al modo de modificación de la magnificación. Si utiliza la configuración para equipos portátiles, presione CONTROL DERECHO + F3 para cambiar al modo de modificación de la magnificación.

   En el modo de modificación de la magnificación, el borde parpadea para indicar el objeto que se está editando.

3. Presione CONTROL IZQUIERDO + teclas de flecha para ajustar la medida de la ventana. También puede hacerlo manteniendo pulsada la tecla Z y moviendo el mouse.

4. Presione ESCAPE para salir del modo de modificación de la magnificación.

3.5 Ver otras partes de la pantalla

Cuando se utiliza la ampliación, solo se visualiza una parte de la pantalla. Para ver otras partes, puede mover el puntero del mouse por la pantalla o utilizar las teclas de acceso rápido de SuperNova.

Los movimientos por la pantalla con las teclas de acceso rápido de SuperNova se conocen como panorámica, desplazamiento, ir a o saltar.

- Panorámica

  La opción panorámica mueve el área magnificada por toda la pantalla a velocidad constante en la dirección que se especifique. La velocidad del movimiento se puede aumentar o disminuir presionando unas teclas u otras.

Para hacer una panorámica por la pantalla con el teclado, presione CONTROL DERECHO más una tecla de flecha. Mantenga presionado el CONTROL DERECHO para continuar con la panorámica. Presione la misma tecla de flecha repetidamente (manteniendo presionado el CONTROL DERECHO) para aumentar la velocidad de la panorámica. Presione la tecla de flecha opuesta para reducir la velocidad. Utilice las teclas de flecha para cambiar la dirección. Suelte el CONTROL DERECHO para detener la panorámica.

Al hacer una panorámica con el mouse, la casilla de verificación "La tecla MAYÚS bloquea el desplazamiento del mouse horizontal o verticalmente" que se encuentra en las opciones de "Seguimiento del mouse" de SuperNova (Visual -> Opciones avanzadas -> Rastreo) hace que la panorámica de la vista ampliada a través del mouse se bloquee completamente horizontal o verticalmente mientras se mantiene presionada la tecla MAYÚS (en función de la dirección inicial del movimiento del mouse). Al soltar la tecla MAYÚS, el movimiento del mouse vuelve a la normalidad.

- Desplazamiento (panorámica acelerada).

  El desplazamiento funciona de forma muy similar a la panorámica, pero la velocidad de la panorámica se acelera automáticamente hasta un velocidad máxima concreta mientras se tienen presionadas las teclas.

  Para desplazar el área magnificada, presione y mantenga el CONTROL DERECHO + MAYÚS DERECHA junto con una tecla de flecha. Cuando suelte las teclas, se detendrá el desplazamiento.

- Ir a.

  También puede llevar el área magnificada directamente a diferentes partes de la pantalla. En la tabla siguiente se proporcionan las teclas de acceso rápido que permiten mover el área magnificada a una posición de la pantalla.

Teclas de acceso rápido del Ampliador

Función	Equipo de sobremesa: conjunto de teclado numérico predeterminado	Portátil: conjunto universal
Superior izquierdo	CONTROL DERECHO + TECL NUM 7	Sin asignación
Superior	CONTROL DERECHO + TECL NUM 8	Sin asignación
Superior derecho	CONTROL DERECHO + TECL NUM 9	Sin asignación
Izquierda	CONTROL DERECHO + TECL NUM 4	Sin asignación
Centro	CONTROL DERECHO + TECL NUM 5	Sin asignación
Derecha	CONTROL DERECHO + TECL NUM 6	Sin asignación
Inferior izquierdo	CONTROL DERECHO + TECL NUM 1	Sin asignación
Inferior	CONTROL DERECHO + TECL NUM 2	Sin asignación
Inferior derecho	CONTROL DERECHO + TECL NUM 3	Sin asignación

- Saltar.

También se puede mover por la pantalla a saltos. Esta opción se diferencia de la panorámica en que la pantalla magnificada no se desplaza suavemente, sino que se mueve a saltos.

Teclas de acceso rápido del ampliador

Función	Equipo de sobremesa: conjunto de teclado numérico predeterminado	Portátil: conjunto universal
Arriba	CONTROL IZQUIERDO + BLOQ MAYÚS + TECL NUM 8	CONTROL DERECHO + MAYÚS DERECHA + FLECHA ARRIBA
Abajo	CONTROL IZQUIERDO + BLOQ MAYÚS + TECL NUM 2	CONTROL DERECHO + MAYÚS DERECHA + FLECHA ABAJO
Izquierda	CONTROL IZQUIERDO + BLOQ MAYÚS + TECL NUM 4	CONTROL DERECHO + MAYÚS DERECHA + FLECHA IZQUIERDA
Derecha	CONTROL IZQUIERDO + BLOQ MAYÚS + TECL NUM 6	CONTROL DERECHO + MAYÚS DERECHA + FLECHA DERECHA

Guardar y restaurar la posición de la pantalla

También se ofrece la posibilidad de guardar la posición de la pantalla. De este modo también podrá volver a la misma posición presionando una combinación de teclas de acceso rápido.

Para guardar una posición de la pantalla:

1. Mueva la ventana magnificada a la posición deseada.
2. Presione CONTROL DERECHO + TECL NUM 0 para guardar la posición.

Para devolver la ventana magnificada a la posición guardada:

Presione CONTROL DERECHO + PUNTO TECL NUM para volver a la posición de pantalla guardada.

3.6 Visión global de la posición de la ventana magnificada

Puede ver la posición de la ventana magnificada en la pantalla utilizando la Visión global del Magnificador. Puede entrar y salir de la Visión global del Magnificador utilizando una combinación de teclas de acceso rápido de SuperNova.

Para entrar y salir de la Visión global del Magnificador:

Presione CONTROL IZQUIERDO + SIGNO MENOR QUE.

3.7 Crear ventanas magnificadas estáticas para mostrar información

Puede crear ventanas magnificadas estáticas para mostrar en ella permanentemente un parte concreta de la pantalla. Así, puede tener controlada información importante en constante cambio mientras utiliza la aplicación.

SuperNova denomina estas ventanas "Áreas enlazadas". Las áreas enlazadas pueden tener su propia medida de magnificación y estarán visibles aún cuando se apague el Magnificador de SuperNova.

Ejemplos:

- Puede enlazar el reloj de la bandeja del sistema para ver la hora fácilmente.
- Puede enlazar el espacio de la barra de estado del procesador de texto donde se muestra el número de página actual para consultar fácilmente en qué página se encuentra.
- Puede enlazar la Barra de fórmulas de una hoja de cálculo para ver fácilmente si la celda actual contiene texto o una fórmula.

Puede crear un área enlazada utilizando el puntero del mouse o utilizando el teclado.

3.7.1 Crear un área enlazada utilizando el teclado

Para crear y cambiar la posición y la medida de una ventana de área enlazada utilizando las teclas de acceso rápido es necesario utilizar el modo de modificación de la ampliación.

Para crear y ajustar la medida y la posición de un área enlazada:

1. Si utiliza el conjunto de teclas de acceso rápido para equipos de escritorio, presione CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 5 para crear un área enlazada nueva y entrar automáticamente en modo de modificación de la ampliación. Si, por el contrario, utiliza el conjunto de teclas de acceso rápido para equipos portátiles, presione CONTROL IZQUIERDO + MAYÚS IZQUIERDA + ALT + H para crear un área enlazada nueva y entrar automáticamente en modo de modificación de la ampliación.

   En el modo de modificación de la ampliación, el borde parpadea para indicar el objeto que se está editando.

2. Utilice las teclas de acceso rápido del Ampliador para cambiar la medida del contenido dentro del área enlazada.

3. Utilice las teclas de flecha para colocar la ventana en la pantalla. También puede hacerlo manteniendo pulsada la tecla Z y moviendo el mouse.

4. Presione MAYÚS IZQUIERDA + teclas de flecha para modificar el contenido del área enlazada. También puede hacerlo manteniendo pulsada la tecla C y moviendo el mouse.

5. Presione CONTROL IZQUIERDO + teclas de flecha para ajustar la medida de la ventana. También puede hacerlo manteniendo pulsada la tecla X y moviendo el mouse.

6. Presione ESCAPE para salir del modo de modificación de la ampliación.

Durante el proceso de creación, probablemente tenga que ajustar la medida en varias ocasiones hasta lograr la medida, la posición y el contenido del área enlazada deseados.

3.7.2 Modificar un área enlazada utilizando el teclado

Para modificar un área enlazada existente:

1. Si utiliza el conjunto de teclas de acceso rápido de equipos de escritorio, presione CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 6. Si utiliza el conjunto de teclas de acceso rápido de equipos portátiles presione CONTROL IZQUIERDO + F6. Entrará en modo de modificación de la magnificación con el área enlazada que tiene actualmente seleccionada identificada con un borde parpadeante.

2. Si tiene más de un área enlazada, podrá pasar de una a otra presionando CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 6 si utiliza el conjunto de teclas de acceso rápido para equipos de escritorio. Presione CONTROL IZQUIERDO + F6 si utiliza el conjunto de teclas de acceso rápido para equipos portátiles.

3. Utilice las teclas de acceso rápido del Magnificador y del modo de modificación de la magnificación para ajustar la medida, la ubicación o el contenido del área enlazada.

4. Presione ESCAPE para salir del modo de modificación de la magnificación.

3.7.3 Eliminar un área enlazada utilizando el teclado

Para eliminar un área enlazada existente:

1. Si utiliza el conjunto de teclas de acceso rápido de equipos de escritorio, presione CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 6. Si utiliza el conjunto de teclas de acceso rápido de equipos portátiles presione CONTROL IZQUIERDO + F6. Entrará en modo de modificación de la magnificación con el área enlazada que tiene actualmente seleccionada identificada con un borde parpadeante.

2. Si tiene varias áreas enlazadas, puede cambiar de una a otra. Para ello, presione CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 6 si utiliza el conjunto de teclas de acceso rápido para equipos de escritorio. Presione CONTROL IZQUIERDO + F6 si utiliza el conjunto de teclas de acceso rápido para equipos portátiles.

3. Presione SUPRIMIR para quitar el área enlazada.

Cuando se elimina un área enlazada, el foco se traslada a la siguiente área enlazada. Si no queda ninguna, se sale automáticamente del modo de modificación de la magnificación. Si todavía queda alguna pero no desea modificarla, presione ESCAPE.

3.7.4 Crear un área enlazada utilizando el ratón

Puede crear áreas enlazadas desde el cuadro de diálogo "Create Hooked Areas" (Crear áreas enlazadas). Para abrir este cuadro de diálogo, abra el menú "Visual" y seleccione el elemento del menú "Advanced Options" (Opciones avanzadas). En la hoja de propiedades de "Hooked areas"

(Áreas enlazadas) del cuadro de diálogo "Advanced Options" (Opciones avanzadas), haga clic en el botón "New" (Nueva).

En el cuadro de diálogo "Create Hooked Areas", tendrá que hacer lo siguiente:

1. Proporcionar una descripción exclusiva para el área enlazada.
2. Marcar o desmarcar la casilla de verificación "Track focus" (Seguir foco).

   Esta casilla determina si el contenido del área enlazada está fijo o muestra el foco actual. Si marca esta casilla, el contenido del área enlazada seguirá al foco. Si marca esta casilla de verificación, el botón "Choose screen area to hook" (Elegir área de pantalla para enlazar) se deshabilitará, porque no se ha definido un área de la pantalla.
3. Seleccione el botón "Choose screen area to hook" (Elegir área de pantalla para enlazar) para definir el área de la pantalla que se va a mostrar.
4. Utilice el botón izquierdo del ratón con el ratón en movimiento para crear un área nueva. Presione INTRO o el botón derecho del ratón para aceptar o ESCAPE para cancelar.
5. Marcar o desmarcar la casilla de verificación "Smoothing" (Suavizado).
6. Seleccione el botón "Move the hook window" (Mover la ventana del enlace) para situar el área enlazada y definir el tamaño de ampliación.

   El tamaño de ampliación se puede definir usando las teclas rápidas normales. Utilice el movimiento del ratón o las teclas del cursor para mover el enlace. Presione INTRO o el botón izquierdo del ratón para aceptar o ESCAPE para cancelar.
7. Seleccione el botón "Ok" para confirmar y guardar la nueva área enlazada.

Puede ver una lista de las áreas enlazadas que hay creadas en la pestaña "Hooked Areas" (Áreas enlazadas), en el cuadro de diálogo "Visual Advanced Options" (Opciones avanzadas visuales). También puede

ordenar, modificar y eliminar áreas enlazadas existentes en la pestaña "Hooked Areas" (Áreas enlazadas).

3.7.5 Mostrar u ocultar áreas enlazadas

Puede mostrar u ocultar un área enlazada utilizando una tecla de acceso rápido de SuperNova. Esta función puede resultar útil cuando no se desea que las áreas enlazadas estén siempre visibles, sino cuando se necesita información de otras partes de la pantalla.

Teclas de acceso rápido del Magnificador

Función	Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado	Portátil: Conjunto universal
Apagar y encender las áreas enlazadas	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 3	CONTROL IZQUIERDO + F5

CAPÍTULO 4

Mejoras de la pantalla

Si encuentra dificultad para ver la pantalla, seguir el foco o seguir el puntero del mouse, las mejoras visuales disponibles en SuperNova pueden proporcionarle una solución.

4.1 Mejorar la visualización de la pantalla



SuperNova contiene opciones para mejorar la visualización de la pantalla. Una de estas opciones es Combinaciones de color SuperNova, que puede cambiar el contraste, el brillo y los colores en la pantalla.

Puede elegir una Combinación de color SuperNova preestablecida o crear una combinación personalizada. Se aplica una Combinación de color a la pantalla completa y funcionará incluso si el Magnificador está desactivado.

Puede elegir una Combinación de color a través de las opciones "Visual" en el panel de control de SuperNova. También puede apagar o encender una Combinación de color con las opciones "Visual" en el panel de control de SuperNova o mediante las teclas de acceso rápido.

Teclas de acceso rápido del Magnificador

Función	Ordenador de sobremesa: conjunto de teclado numérico predeterminado	Portátil: conjunto universal
Encender o apagar un esquema de color	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 0	ALT + MAYÚS + C

Para crear una combinación personalizada, debe seleccionar "Personalizado" antes de poder elegir "Configurar..." de la lista de Combinaciones de colores. Elegir "Configurar..." abre el cuadro de diálogo "Configurar combinación de color personalizada". El cuadro de diálogo contiene diferentes controles según la configuración elegida. Esto incluye configuraciones de brillo, contraste, tinte y sustitución de color.

Si está utilizando varios monitores y ha activado la casilla de verificación "Colores independientes" en el cuadro de diálogo de configuración de "Varios monitores" de SuperNova, se activará o desactivará la Combinación de color solo en el monitor en el que se encuentra el cursor del ratón cuando presione la tecla de acceso rápido de encendido/apagado de Combinación de color.

4.2 Facilitar la visualización del foco



SuperNova contiene opciones para ver la pantalla de forma más cómoda. Una de estas opciones es Resaltado de SuperNova, que facilita la visualización de los diferentes tipos de focos adjuntando un marcador visual al foco.

Los tipos de foco incluyen:

- Mouse (el puntero controlado por el mouse).
- Cursor (el cursor de tipo rayo que se usa en las áreas de edición).
- Línea (la línea en la que se coloca el cursor de tipo rayo).
- Foco (el foco de los cuadros de diálogo y los menús).

Puede elegir una Combinación de resaltado preestablecida de SuperNova o crear su propia combinación personalizada. Elija una combinación de las opciones "Visuales" del panel de control de SuperNova.

Para crear una combinación personalizada, debe seleccionar "Configuración" de la lista de Combinaciones de resaltado. Cuando elija "Configuración", SuperNova cambia automáticamente a la combinación "Personalizada" antes de abrir el cuadro de diálogo Opciones de resaltado. SuperNova también usa los valores de combinación anteriores para definir los valores predeterminados de la nueva combinación personalizada.

> Consejo: si no ve ningún efecto visual al elegir una combinación, asegúrese de que "Resaltado" está activado. Puede activar Resaltado seleccionando la opción de "Resaltado" en el menú "Visual" o seleccionando el botón "Resaltado" de la pestaña "Visual" del panel de control de SuperNova.

4.3 Facilitar la visualización del puntero



SuperNova contiene opciones para ver la pantalla de forma más cómoda. Una de estas opciones es Punteros de mouse de SuperNova, que le permite cambiar el tamaño y el color del puntero en la pantalla.

Puede elegir una combinación de Puntero de mouse de SuperNova preestablecida o crear su propia combinación personalizada a través de las opciones "Visuales" del panel de control de SuperNova.

Las combinaciones preestablecidas incluyen:

- Rojo grande
- Blanco grande
- Amarillo grande

La selección de la combinación "Estándar de Windows" cambiará la combinación del puntero de nuevo a la predeterminada de Windows.

CAPÍTULO 5

Vista de líneas



La vista de líneas es un modo de lectura de SuperNova. La vista de líneas muestra el contenido de la pantalla en una sola línea que recorre toda la pantalla. Puede controlar el tamaño, los colores, la fuente, y la velocidad y la posición del texto de desplazamiento.

5.1 Iniciar la vista de líneas

Puede iniciar la vista de líneas desde las opciones "Visual" del Panel de control SuperNova o utilizando una tecla de acceso rápido. La vista de líneas puede iniciarse en la posición actual del foco o, por el contrario, hacer caso omiso de esto y mostrar la ventana o pantalla actual.

Teclas de acceso rápido de la vista de líneas

Función	Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado	Portátil: Conjunto universal
Iniciar la vista de líneas (restringida a la ventana del documento)	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM PUNTO	Sin asignación
Iniciar la vista de líneas (restringida a toda la ventana)	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 9	Sin asignación

Iniciar la vista de líneas en la posición actual del foco (restringido a la ventana del documento)	CONTROL IZQUIERDO + MAYÚS IZQUIERDA + TECL NUM 2	ALT + MAYÚS + L
Iniciar la vista de líneas en la posición actual del foco (restringido a toda la ventana)	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 2	ALT + MAYÚS + V

5.2 Desplazar el texto en la vista de líneas

Se pueden utilizar varias teclas de acceso rápido para controlar el desplazamiento del contenido en la vista de líneas.

Teclas de acceso rápido de la vista de líneas

Función	Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado	Portátil: Conjunto universal
Ir al foco	TECL NUM 0	F5
Iniciar y detener	BARRA ESPACIADORA	BARRA ESPACIADORA
Ir a la primera línea	INICIO	INICIO
Ir a la última línea	FIN	FIN
Línea anterior	RE PÁG	RE PÁG
Línea siguiente	AV PÁG	AV PÁG
Desplazar más rápidamente	FLECHA ARRIBA	FLECHA ARRIBA
Desplazar más lentamente	FLECHA ABAJO	FLECHA ABAJO
Saltar hacia adelante	INTRO	INTRO

Avanzar	FLECHA DERECHA	FLECHA DERECHA
Retroceder	FLECHA IZQUIERDA	FLECHA IZQUIERDA
Salir del modo de vista de líneas	ESCAPE	ESCAPE

Sugerencia: El modo de vista de líneas se restringe a lo que se ve en la pantalla. En algunas aplicaciones es posible cambiar la configuración de la vista de la aplicación para aumentar la cantidad de datos visibles simultáneamente. Por ejemplo, en la Vista preliminar de Microsoft Word se puede configurar la vista de la página para ver hasta un máximo de 6 páginas. En el modo de vista de líneas, se recorrerían las 6 páginas.

5.3 Cambiar el color, la fuente y los items mostrados en la vista de líneas.

Puede cambiar los colores, las fuentes, los objetos y el tamaño del texto mostrado en la vista de líneas.

Para ir a las opciones de la vista de líneas:

1. Presione control izquierdo + BARRA ESPACIADORA. Se abrirá el Panel de control de SuperNova.
2. Presione ALT + V. Se abrirá el menú "Visual".
3. Presione la FLECHA ABAJO hasta "Opciones de Excel" y presione INTRO. Se abrirá el cuadro de diálogo "Opciones avanzadas visuales".
4. Presione CONTROL + TAB para abrir la ficha "Vista de líneas".
5. Realice los cambios.
6. Presione TAB hasta el botón "Aceptar" y presione la BARRA ESPACIADORA. Así confirmará los cambios y cerrará el cuadro de diálogo.

CAPÍTULO 6

Lector de documentos



El lector de documentos le permite crear su propio entorno de lectura, donde puede ajustar el valor del texto, el fondo y el realce para que pueda leer con comodidad. Puede visualizar texto de documentos, páginas Web o cualquier otro origen que muestre texto en la pantalla.

6.1 Iniciar el lector de documentos

Para iniciar el lector de documentos, haga clic en el botón Doc Reader (Lector de documentos), en la página "Visual" del panel de control de SuperNova, o presione una tecla de acceso rápido de SuperNova.

Teclas de acceso rápido del lector de documentos

Función	Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado	Portátil: Conjunto universal
Iniciar el lector de documentos	BLOQUEO MAYÚS + TECL NUM MÁS	ALT + MAYÚS + D

Se cargará el texto en el lector de documentos. Esto puede tardar unos segundos. En el lector de documentos puede usar las teclas de flecha para mover el realce por el texto o presionar TAB para desplazarse por las opciones de la barra de herramientas del lector de documentos.

6.2 Controlar la lectura

Los elementos de la barra de herramientas del lector de documentos controlan el entorno de lectura. Para definir los controles avanzados, como la configuración de color, las fuentes y la velocidad de lectura, vaya al cuadro de diálogo Configuración del lector de documentos.

Tras iniciar el lector de documentos, podrá acceder a las opciones de la barra de herramientas presionando la tecla TAB. Si presiona la tecla TAB varias veces, recorrerá las opciones de la barra de herramientas y, finalmente, volverá a la ventana del documento. También puede usar MAYÚS + TAB para recorrer los botones de la barra de herramientas hacia atrás.

Barra de herramientas del lector de documentos.



Presione este botón para iniciar o detener la lectura del documento. También puede presionar la BARRA ESPACIADORA para iniciar o detener la lectura del documento. Al leer, el lector de documentos resalta la palabra actual y se desplaza automáticamente por la ventana del documento.



Presione este botón para aumentar el tamaño del texto. El cambio de tamaño del texto es independiente de las opciones de fuente personalizadas del cuadro de diálogo Configuración del lector de documentos.



Presione este botón para disminuir el tamaño del texto. El cambio de tamaño del texto es independiente de las opciones de fuente personalizadas del cuadro de diálogo Configuración del lector de documentos.



Presione este botón para ir pasando por las distintas opciones de resaltado, donde puede optar por resaltar líneas, frases o párrafos. El elemento seleccionado determina lo que se va a resaltar como una "unidad" y el tamaño de los desplazamientos al recorrer el texto hacia arriba o hacia abajo.



Presione este botón para desplazarse por una serie de combinaciones de colores diferentes. Esto resulta útil si encuentra dificultades para ver el texto del documento en pantalla debido a los colores y el contraste de la pantalla.



Presione este botón para abrir el menú "Modo", donde puede elegir entre opciones de modo de visualización como "Ajuste de texto" o "Línea simple".

6.3 Salir del lector de documentos

Para hacerlo:

Presione ESCAPE.

CAPÍTULO 7

Modo invitado y Modo de emergencia

La edición USB de SuperNova contiene una función especial denominada Modo invitado. El Modo invitado permite que la edición USB funcione en entornos en los que el usuario no tiene acceso de Administrador en el equipo, como bibliotecas públicas y centros de negocios de hoteles.

Inicio

Para iniciar la edición USB de SuperNova, ejecute el programa Go.exe (que se encuentra en la carpeta raíz de la unidad USB).

Si ha instalado anteriormente los componentes USB adicionales de SuperNova en el equipo, es probable que la edición USB se inicie automáticamente al realizar la inserción.

Si inserta la edición USB en un equipo que ya tiene instalada una copia de SuperNova de la misma versión (o superior) que la edición USB, o en un equipo en el que haya instalado previamente los componentes USB adicionales, no tendrá disponible la opción de Modo invitado. Alternativamente, la edición USB se ejecutará en Modo normal.

Al iniciar la edición USB de SuperNova en un equipo nuevo o en un equipo sin componentes adicionales instalados, aparecerá un cuadro de diálogo con dos opciones:

- Continuar en Modo invitado

o

- Instalar componentes y reiniciar

Si selecciona la opción de instalación de componentes, aparecerá el cuadro de diálogo Control de cuentas de usuario de Windows, con la solicitud de permisos de administrador. Si selecciona "Sí", se instalarán los componentes adicionales. En Windows 7, el equipo se reiniciará. En Windows 8 y Windows 10, solo se reiniciará SuperNova, que, a continuación, se ejecutará en Modo normal.

8.1 Limitaciones del Modo invitado

- La visualización panorámica de la ampliación no será tan suave como en el Modo normal. El uso de CPU y GPU en el equipo también puede ser un poco más elevado que en el Modo normal, incluso cuando no hay actividad. También es posible que la ampliación se realice con menos suavidad si utiliza más de una pantalla.

- Es poco probable que la transmisión de vídeo de Conectar y ver se actualice a más de 30 fotogramas por segundo.

- Los punteros de mouse personalizados no funcionarán. Puede intentar utilizar el panel de control de Windows para establecer un puntero de mouse personalizado, pero es posible que esta acción tampoco funcione si elige uno de los punteros de mouse personalizados de SuperNova (debido a un error en Windows).

- En la pantalla de inicio de sesión de Windows no hay compatibilidad con voz ni con la ampliación. (Alternativamente, puede utilizar el Narrador de Windows o la Lupa de Windows).

- Los cuadros de diálogo Control de cuentas de usuario de Windows no se ampliarán ni se les aplicará voz.

- Es posible que no pueda acceder a ninguna aplicación que ejecute como Administrador y que se originen otros problemas, en particular, que no funcionen las teclas de acceso rápido de SuperNova y que la salida de voz y Braille que reciba sea limitada o incluso nula. Esto también puede impedir el funcionamiento de la interfaz de usuario en el Modo de vista de líneas y en Conectar y ver. Si se bloquea en este escenario, presione ALT+TAB para salir de la aplicación.

- El actualizador de Internet seguirá funcionando para los mapas y los scripts, pero no descargará actualizaciones de productos.

- Las funciones de voz y Braille de las aplicaciones modernas de Windows 8/10 deben funcionar igual que en el Modo normal. Sin embargo, es posible que el suavizado de imagen del texto ampliado no funcione.

- Al pulsar IMPRIMIR PANTALLA o ALT+IMPRIMIR PANTALLA se capturará la pantalla ampliada o el área de la pantalla ampliada donde estaría la ventana si no se ampliara (respectivamente). Para capturar pantallas sin ampliar, desactive la ampliación antes de pulsar IMPRIMIR PANTALLA.

- Las sesiones de control remoto de TeamViewer capturarán la pantalla ampliada, no la pantalla sin ampliar.

- Los gestos de la pantalla táctil de SuperNova no funcionarán.

- Es posible que las funciones de OCR de SuperNova no funcionen.

Consulte el sitio web de Dolphin en relación con cualquier otra advertencia.

Modo de emergencia

Si ejecuta una copia de SuperNova instalada en el disco duro local del equipo, pero faltan algunos componentes, SuperNova se iniciará en Modo de emergencia y aparecerá un cuadro de diálogo con dos opciones:

- Continuar en Modo de emergencia

o

- Instalar componentes y reiniciar

Si selecciona la opción de instalación de componentes y reinicio, aparecerá el cuadro de diálogo Control de cuentas de usuario de Windows,

con la solicitud de permisos de administrador. Si selecciona "Sí", se instalarán los componentes adicionales y se reiniciará el equipo.

El Modo de emergencia es funcionalmente equivalente al Modo de invitado. Consulte las limitaciones indicadas anteriormente para obtener más información.

Nota: Actualmente, el Modo invitado y el Modo de emergencia solo están disponibles en Windows 10 (y versiones anteriores).

CAPÍTULO 8

Archivos de configuración

9.1 Crear una configuración de aplicación

Si ajusta regularmente la configuración de salida de SuperNova cuando trabaja en diferentes programas, el uso de un archivo de configuración de aplicación puede ofrecerle una solución automatizada.

Para crear un archivo de configuración de aplicación:

1. Ejecute la aplicación para la que desea crear el archivo de configuración.
2. Presione CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA. Se abrirá el panel de control de SuperNova.
3. Presione ALT + A. Se abrirá el menú "Archivo" con "Nuevo" seleccionado.
4. Presione FLECHA DERECHA hacia el submenú "Nuevo".
5. Seleccione "Configuración de aplicación" y presione INTRO. Se abrirá el cuadro de diálogo "Seleccionar archivo de configuración".
6. Seleccione "Crear un archivo de configuración nuevo".
7. Presione TAB hasta el botón "Aceptar" y presione BARRA ESPACIADORA. Se abrirá el cuadro de diálogo "Crear archivo de configuración nuevo".
8. Indique un nombre para el nuevo archivo de configuración de aplicación, elija si desea crear un archivo de configuración vacío o copiar un archivo de configuración existente y, a continuación, presione TAB hasta el botón "Aceptar" y presione BARRA ESPACIADORA. Se cerrará el cuadro de diálogo y volverá al panel de control de SuperNova.

A partir de ese momento su archivo de configuración de aplicación estará en uso. Puede comprobar cuál es el archivo de configuración de aplicación que se usa actualmente leyendo la barra de estado en el panel de control de SuperNova.

9.2 Crear una configuración de situación

Si ajusta regularmente la configuración de salida de SuperNova cuando aparecen determinados cuadros de diálogo en una aplicación, el uso de una configuración de situación puede ofrecerle una solución automatizada. Las configuraciones de situación son subconjuntos de los archivos de configuración de aplicación y se almacenan dentro del mismo archivo.

Para crear una configuración de situación:

1. Ejecute la aplicación y vaya a la situación para la que desea crear una configuración de situación.
2. Presione CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA. Se abrirá el panel de control de SuperNova.
3. Presione ALT + A. Se abrirá el menú "Archivo" con "Nuevo" seleccionado.
4. Presione FLECHA DERECHA hacia el submenú "Nuevo".
5. Seleccione "Configuración de situación" y presione INTRO. Se abrirá el cuadro de diálogo "Nueva configuración de situación".
6. Seleccione "Crear nueva situación".
7. Presione TAB hasta el botón "Aceptar" y presione BARRA ESPACIADORA. Se abrirá el cuadro de diálogo "Escriba el nombre de la nueva situación".
8. Indique un nombre para la nueva configuración de situación y presione TAB hasta el botón "Aceptar" y presione BARRA ESPACIADORA. Se abrirá el cuadro de diálogo "Ventana".

9. Si es necesario, ajuste el nombre de la ventana y presione TAB hasta el botón "Aceptar" y presione BARRA ESPACIADORA. Se cerrará el cuadro de diálogo y volverá al panel de control de SuperNova.

A partir de ese momento su configuración de situación estará en uso. Puede comprobar cuál es la configuración de situación que se utiliza actualmente leyendo la barra de estado en el panel de control de SuperNova.

9.3 Guardar cambios de configuración

SuperNova guarda automáticamente los cambios realizados en la configuración de SuperNova.

Para detener este comportamiento, deseleccione la casilla de verificación "Guardar siempre la configuración de usuario". Encontrará la casilla de verificación "Guardar siempre la configuración de usuario" en el cuadro de diálogo "Preferencias de inicio", que se abre desde el menú "General" del panel de control de SuperNova.

Una vez deseleccionada la casilla de verificación "Guardar siempre la configuración de usuario", dispondrá de una casilla adicional "Preguntar al usuario". Si selecciona esta casilla de verificación, se abrirá una ventana de mensaje al salir de SuperNova en la que se pregunta si desea continuar sin guardar los cambios realizados.

También puede guardar manualmente los cambios en cualquier momento mediante la selección del elemento de menú "Guardar configuración". Encontrará este elemento en el menú "Archivo" del panel de control de SuperNova.

9.4 Cambiar el archivo de mapas

Si utiliza una aplicación que no dispone de ningún archivo de mapas específico, SuperNova utilizará el archivo de mapas "Default Application" (Aplicación predeterminada).

Si observa que SuperNova no funciona bien con la aplicación al utilizar el archivo de mapas "Default Application" (Aplicación predeterminada), le recomendamos que pruebe con otro archivo de mapas. Puede intentarlo con tantos archivos de mapas como desee.

Sugerencias:

- Pruebe a utilizar un archivo de mapas para otra versión de la misma aplicación. Puede que encuentre un archivo de mapas para alguna versión antigua de la aplicación que funcione igual de bien con la versión nueva.

- Pruebe a utilizar un archivo de mapas creado para otra aplicación del mismo fabricante. Puede que encuentre un archivo de mapas para otra aplicación del mismo fabricante que funcione bien con la suya; por ejemplo, si utiliza una aplicación de Microsoft, pruebe a utilizar el archivo de mapas de Microsoft Office.

- Pruebe a utilizar el archivo de mapas "MSAA Application" (Aplicación MSAA) si sabe que su aplicación es compatible con MSAA.

Para elegir otro archivo de mapas:

1. Ejecute la aplicación.

2. Presione CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA.

   Se abrirá el panel de control de SuperNova.

3. Presione ALT + A.

   Se abrirá el menú "File" (Archivo) con el elemento del menú "New" (Nuevo) seleccionado.

4. Presione la FLECHA DERECHA para abrir el submenú "New" (Nuevo), presione la FLECHA ABAJO hasta llegar a "Map" (Mapa) y, a continuación, presione INTRO.

   Se abrirá el cuadro de diálogo "Select Map file" (Seleccionar archivo de mapas).

5. Presione la FLECHA ABAJO para seleccionar la opción "Use an existing Map file" (Utilizar un archivo de mapas existente).

6. Desplácese con TAB hasta la lista de mapas y seleccione un archivo de mapas con las teclas de flecha.

7. Presione TAB hasta el botón "Aceptar" y presione la BARRA ESPACIADORA.

   Se cerrará el cuadro de diálogo.

8. Presione ESCAPE.

   Se cerrará el panel de control de SuperNova y volverá a la aplicación.

La configuración de detección del nuevo archivo de mapas se aplicará inmediatamente. Si sigue teniendo problemas para acceder a la aplicación, póngase en contacto con Dolphin o con su distribuidor local de Dolphin para recibir asistencia.

CAPÍTULO 9

Media (Multimedia)

Puede usar Media (Multimedia) para buscar y descargar libros y revistas de bibliotecas en línea y explorar nuevas fuentes, escuchar emisoras de radio y reproducir podcasts populares.

IMPORTANTE: Las opciones disponibles en Media (Multimedia) podrán ser diferentes según el idioma de su Panel de Control de SuperNova.

10.1 Libros de la Estantería

La opción Libros permite buscar, descargar y abrir libros y revistas de bibliotecas en línea. También puede utilizar esta opción para abrir archivos en el equipo. Los libros y los archivos que seleccione se abrirán en Dolphin EasyReader.

10.1.1 Abrir un archivo en EasyReader:

Con la Estantería puede abrir archivos en el equipo. Entre los formatos de archivo que pueden abrirse se incluyen archivos de texto, archivos ePub, libros DAISY y archivos HTML. Los archivos se abrirán en Dolphin EasyReader.

Para abrir un archivo desde el panel de control de SuperNova:

1. Abra la opción "Estantería", seleccione "Libros" y elija "Abrir archivo en el lector". Se abrirá el cuadro de diálogo Abrir.

2. Seleccione el archivo que desea abrir. Si está utilizando el teclado, puede presionar MAYÚS + TAB en la lista de archivos y, posteriormente, utilizar las teclas de flecha para seleccionar el archivo y presionar ENTRAR. Si el archivo se encuentra en otra carpeta, utilice la tecla de RETROCESO para ascender un nivel y ENTRAR para abrir las

distintas carpetas hasta seleccionar el archivo. Por último, presione ENTRAR de nuevo.

3. Seleccione la configuración de conversión.

4. Cuando haya terminado, seleccione el botón "Aceptar". Una ventana de mensaje mostrará el progreso de la conversión. Cuando se complete la conversión, se abrirá el libro en Dolphin EasyReader.

5. Cuando haya terminado de leer el texto, presione ALT + F4 para cerrar la ventana.

Una forma rápida de escanear y leer archivos PDF es hacer clic con el botón derecho en el archivo PDF y seleccionar el menú contextual "Abrir con" -> "Dolphin SuperNova".

10.1.2 Abrir un libro de una biblioteca en línea

Desde la Estantería puede descargar y abrir archivos de bibliotecas en línea. Los archivos se abrirán en Dolphin EasyReader.

Para abrir un libro desde el panel de control de SuperNova:

1. Abra la opción "Estantería", seleccione "Libros" y elija "Libros en línea". La aplicación Dolphin EasyReader se abrirá y le pedirá que inicie sesión (o cree una cuenta) si es la primera vez que utiliza EasyReader.

2. Seleccione la biblioteca que desea visitar en la barra lateral. Si la biblioteca no está en la lista, seleccione "Administrar bibliotecas" y agregue la biblioteca.

3. Si es necesario iniciar sesión en la biblioteca, introduzca su nombre de usuario y contraseña.

4. Examine los libros utilizando las categorías disponibles o utilice el cuadro de búsqueda para encontrar un libro. Tenga en cuenta que no todas las bibliotecas en línea ofrecen capacidades de búsqueda. En estos casos, el cuadro de búsqueda no estará disponible.

5. Si desea obtener más información sobre un libro, seleccione el icono "Información".

6. Cuando encuentre un libro que desee leer, seleccione el icono "Descargar". Durante el proceso de descarga, puede seleccionar el icono "Cancelar" para cancelar la descarga.

7. Una vez finalizada la descarga, seleccione el icono "Reproducir" para abrir el libro. Alternativamente, puede continuar navegando y descargar más libros. Los libros que descargue se agregan a "Mis libros".

10.1.3 Abrir el último libro que se ha leído

Para seguir leyendo el último libro al que se accedió, abra la opción "Estantería", seleccione "Libros" y elija "Continuar leyendo...". El libro se abre en Dolphin EasyReader. Se situará al usuario en la última ubicación donde estaba del libro.

10.2 Comandos de teclado del lector de SuperNova

Los libros que se abren desde Estantería se muestran como una página HTML en el lector de SuperNova. Esto permite al usuario leer el libro y desplazarse por él como lo haría en una página web.

Asimismo, SuperNova ofrece los comandos de teclado siguientes:

Función	Tecla de acceso rápido
Desplazarse entre la ventana del documento y la barra de herramientas	F6
Desplazarse entre los botones de la barra de herramientas	TAB y MAYÚS + TAB
Reproducir o detener (solo disponible si el libro incluye contenido de audio)	F5
Abrir Contenido	ALT + C
Abrir Configuración	ALT + S
Acercar	ALT + I

Alejar	ALT + O
Salir	ALT + E (o ALT + F4)

CAPÍTULO 10

Conectar y ver



Conectar y ver de SuperNova le permite conectar una cámara de alta definición (HD) a su equipo y ampliar los elementos, como periódicos, revistas, facturas, etiquetas e incluso objetos, en la pantalla de su equipo.

También puede usar Conectar y ver de SuperNova para conectarse a otros equipos y ver que lo se muestra en su pantalla en la propia pantalla de su equipo. Por ejemplo, puede conectarse a la pizarra interactiva del profesor o al equipo del formador y seguir lo que están presentando en su propia pantalla.

11.1 Conectar y ver cámara

Conectar y ver cámara le permite conectar cualquier cámara de alta definición (HD) a su equipo y ampliar el material impreso y los objetos en la pantalla de su equipo.

Puede usar cualquier cámara de alta definición (HD) con SuperNova. Para obtener una lista oficial de las cámaras que se han probado y que Dolphin recomienda, visite el sitio web de Dolphin o póngase en contacto con su distribuidor local de Dolphin.

Antes de que pueda usar Conectar y ver cámara de SuperNova, necesitará adquirir una cámara adecuada, configurar su estación de trabajo y seleccionar la cámara en SuperNova.

11.1.1 Adquirir una cámara y un soporte adecuados

Para obtener mejores resultados, necesitará una cámara HD con enfoque automático, que proporcione una resolución de vídeo de 1080p con una corrección automática de baja luminosidad. Se necesitará una conexión de un puerto USB 2.0 al equipo.

Además de la cámara, debería usar un soporte para sostener la cámara en el escritorio. Con el uso de un soporte se asegura de que la cámara está segura y estable sobre los elementos que desea ver.

11.1.2 Configurar su estación de trabajo

Para obtener mejores resultados, asegúrese de que coloca la cámara cerca de la pantalla de su equipo para facilitar el ajuste de los elementos que desea ver mientras sigue viendo la pantalla. También debería asegurarse de que la cámara está en una zona segura, limpia y bien iluminada de su escritorio para evitar sombras en los elementos que desea ver.

11.1.3 Seleccionar la cámara en SuperNova

Una vez que haya configurado la cámara en su escritorio y la haya conectado al equipo, debe seleccionar la cámara en el cuadro de diálogo "Configuración de Conectar y ver" de SuperNova.

Para hacer esto desde el panel de control de SuperNova:

1. En la opción "Visual", abra el submenú "Conectar y ver" y elija "Configuración". Se abre el cuadro de diálogo "Configuración de Conectar y ver", en el que se muestra la configuración de la "Cámara".

2. Seleccione su cámara desde la lista "Dispositivos" y elija el botón "Aceptar". Si su cámara no aparece, asegúrese de que está conectada y encendida correctamente.

11.1.4 Usar su cámara con SuperNova

Puede usar las siguientes opciones para habilitar, configurar y ajustar la imagen de la cámara con SuperNova.

Encender el visor

Después de seleccionar el dispositivo en el cuadro de diálogo "Configuración de Conectar y ver", puede ver el resultado activando "Conectar y ver". También puede activar o desactivar "Conectar y ver" con las opciones "Visuales" del panel de control de SuperNova o usando una tecla de acceso rápido.

Teclas de acceso rápido del ampliador

Función	Escritorio: conjunto de teclado numérico predeterminado	Portátil: conjunto universal
Activar o desactivar Conectar y ver	ALT + TECL NUM INTRO	MAYÚS IZQUIERDA + BLOQ MAYÚS + 0

Cuando active "Conectar y ver", una parte de la pantalla empieza a mostrar la imagen de la cámara o la pizarra. Esta área se denomina visor. Puede cambiar la posición del visor en la pantalla y usar la barra de herramientas del visor para ajustar el tamaño, el color y el contraste de la imagen para facilitar su visualización.

Cambiar entre el visor y el escritorio

Para acceder a la barra de herramientas del visor y realizar ajustes en la imagen, es necesario que coloque el foco en el área del visor.

Puede alternar entre el visor y el escritorio presionando BLOQ MAYÚS + BOTÓN CENTRAL DEL MOUSE. Si dispone de cámara activa y conexión a pizarra activa, al presionar BLOQ MAYÚS + BOTÓN CENTRAL DEL MOUSE, se desplazará entre la cámara, la pizarra y el escritorio.

Ajustar la posición y el tamaño del visor

De forma predeterminada, el visor aparece en la mitad superior de la pantalla. Puede cambiar la posición y el tamaño del visor a través de la opción de configuración "Conectar y ver" del panel de control de SuperNova. Puede acoplar el visor en la parte superior, inferior, izquierda o derecha de la pantalla y se puede configurar para que ocupe el 80 %, el 50 % o el 20 % del área de la pantalla.

Mientras se encuentre en la ventana del visor, también puede presionar CONTROL IZQUIERDO + 7 en el teclado numérico para alternar entre el modo de pantalla dividida y el modo de pantalla completa.

También puede realizar esta acción mediante los siguientes botones del visor:







Mientras se encuentre en el modo de pantalla completa, puede seguir usando BLOQ MAYÚS + BOTÓN CENTRAL DEL MOUSE para cambiar entre el visor y el escritorio.

Mostrar y ocultar la barra de herramientas del visor

La barra de herramientas del visor le proporciona controles para modificar la imagen que está viendo. Las opciones disponibles en la barra de herramientas difieren dependiendo de si se ha establecido la conexión con una cámara o con una pizarra.

Puede utilizar los botones Mostrar y Ocultar para controlar la apariencia de la barra de herramientas del visor. Si oculta la barra de herramientas, se mostrará más información en el visor.

El estilo de los botones Mostrar y Ocultar variará según la ubicación del visor. Por ejemplo, si el visor está acoplado en la parte superior, los botones Mostrar y Ocultar aparecerán como flechas apuntando hacia la izquierda y la derecha.



Si la ventana del visor está acoplada en la parte izquierda, los botones Mostrar y Ocultar aparecerán como flechas apuntando arriba y abajo.



En todos los casos, el botón Ocultar aparecerá siempre en la última posición de la barra de herramientas del visor.

También puede ocultar la barra de herramientas del visor presionando CONTROL IZQUIERDO + BARRA DIAGONAL INVERTIDA.

Ampliar la imagen en el visor



Puede cambiar el tamaño de la imagen en el visor usando los botones de ampliación de la barra de herramientas del visor. Si usa un dispositivo con pantalla táctil, también puede cambiar la ampliación reduciendo o expandiendo con dos dedos.

También puede usar las siguientes teclas de acceso rápido:

Teclas de acceso rápido del ampliador

Función	Teclas de acceso rápido del escritorio	Portátil: conjunto universal
Aumentar ampliación	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM MÁS o BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ARRIBA	ALT + SIGNO IGUAL o BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ARRIBA
Reducir ampliación	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM MENOS o BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ABAJO	ALT + GUIÓN o BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ABAJO

Ver otras partes de la imagen

Si la imagen que está examinando es mayor de lo que parecía en el visor, puede mover el puntero del mouse o usar la función panorámica de SuperNova para desplazarse por la imagen con el teclado.

Para hacer una panorámica por la pantalla, presione CONTROL DERECHO más una tecla de flecha. Mantenga pulsado el CONTROL DERECHO para continuar con la panorámica. Presione la misma tecla de flecha repetidamente (manteniendo pulsado el CONTROL DERECHO) para aumentar la velocidad de la panorámica. Presione la tecla de flecha opuesta para reducir la velocidad.

Para obtener más información sobre la panorámica, consulte "Ver otras partes de la pantalla".

Rotar la imagen en el visor



Puede rotar la imagen en el visor para que se muestre de la manera que le resulte más fácil de leer. Esto evita tener que rotar el texto de debajo de la cámara. Cada vez que presione este botón, la imagen rotará 90° en el sentido de las agujas del reloj.

Lo mismo ocurrirá cada vez que presione la combinación de teclas de acceso rápido CONTROL IZQUIERDO + NÚMERO 1 DEL TECLADO NUMÉRICO.

Cambiar los colores de la imagen



Si le resulta difícil ver la imagen debido a los colores y el contraste, puede usar el botón Cambiador de colores para alternar entre varios esquemas de color diferentes.

También puede recorrer los esquemas de color disponibles presionando CONTROL IZQUIERDO + 0 en el teclado numérico.

SuperNova guardará el esquema de color que elija en el cuadro de diálogo "Configuración de Conectar y ver".

Mejora de la calidad de imagen

SuperNova contiene una serie de funciones opcionales de procesamiento de imágenes, como la opción Mejorar colores de alto contraste, que ayuda a aumentar el contraste de las imágenes al utilizar una de las combinaciones de colores integradas de SuperNova. Esta opción es especialmente útil cuando se visualizan páginas que contienen texto y diagramas.

SuperNova también contiene la opción Congelar imagen automáticamente, que intenta eliminar los «puntos de baile» (también conocidos como ruido de impulso) de la secuencia de vídeo de la cámara (especialmente perceptible en entornos poco iluminados).

Nota: Los puntos de baile, también conocidos como ruido «sal y pimienta» (o impulso), son más bien un problema cuando los niveles de luz en el entorno son bajos y la cámara intenta aumentar la exposición de la imagen para capturar tanta luz como sea posible. Sin embargo, dado que el sensor de imagen de la cámara se ha hecho ahora más sensible a la luz, también es ahora más sensible a las interferencias aleatorias, por lo que esto da lugar a un

aumento del ruido impulsivo (que se parece a puntos de baile) en fotogramas de vídeo sucesivos.

Se puede acceder a los ajustes individuales de las funciones de procesamiento de imágenes de SuperNova desde la ficha Cámara del cuadro de diálogo Ajustes de conectar y ver (al que se puede acceder desde Visual ->Conectar y ver ->Ajustes… en el panel de control de SuperNova).

Controlar el enfoque automático

El sistema de enfoque automático de una cámara, si tiene uno, está diseñado para ajustar automáticamente la lente de la cámara con el fin de proporcionar la imagen más nítida posible del sujeto. En algunos casos, la cámara puede intentar volver a enfocar de forma constante lo que ve como un sujeto cambiante, lo que puede ser una distracción. Si ve que el enfoque automático realiza esta acción con regularidad, es posible que quiera desactivar esta función.

Puede activar y desactivar el enfoque automático presionando CONTROL IZQUIERDO + 3 en el teclado numérico.

No todas las cámaras incluyen la función de enfoque automático.

Alternar entre el zoom digital y el óptico

Si su cámara es compatible con el zoom óptico (a veces también conocido como "zoom de hardware"), la ventana del visor "Conectar y ver" mostrará un botón adicional que le permitirá alternar entre el zoom digital y el zoom óptico de su cámara.

El icono que se muestra directamente debajo indica que su cámara se encuentra actualmente en modo de zoom digital.

Al presionar este icono, la cámara cambiará del modo de zoom digital al modo de zoom óptico:



El icono que se muestra directamente debajo indica que su cámara se encuentra actualmente en modo de zoom óptico.

Al presionar este icono o CONTROL IZQUIERDO + 4 en el teclado numérico, la cámara cambiará del modo de zoom óptico al modo de zoom digital:



Bloquear la imagen



El botón Bloquear imagen le permite congelar la pantalla de la imagen actual. Esto le permite explorar la imagen con más detalle sin la posibilidad del cambio de imagen.

Aunque al igual que la barra de herramientas del visor está disponible al usar una cámara, puede que encuentre esta opción más útil al ver presentaciones ya que le permitirá congelar la pantalla en una diapositiva concreta en vez de depender del profesor para que detenga la presentación en ese punto. Cuando desbloquee una imagen, el visor actualiza la imagen de la cámara actual o muestra la pantalla del equipo del presentador actual.

Capturar imagen del visor



El botón Capturar imagen le permite copiar la imagen del visor en el portapapeles de Windows. La imagen que captura SuperNova es la imagen completa, independientemente de la medida del magnificador que esté usando en el visor.

Si se presiona BLOQ MAYÚS + P, también se copia la imagen del visor en el portapapeles de Windows.

11.1.5 Configuración de la cámara

Puede encontrar toda la configuración Conectar y ver de la cámara de SuperNova en el panel de control de SuperNova. Puede encontrar estas opciones a través de la barra de botones Visuales o a través del menú Conectar y ver. Para obtener más información consulte el cuadro de diálogo Conectar y ver.

11.2 Conectar y ver pizarra

Conectar y ver pizarra usa una computación virtual en red (VNC) para permitirle conectarse a otro equipo y ampliar y hacer un seguimiento de lo que aparece en sus pantallas en la pantalla de su equipo.

VNC es un tipo de software que permite ver otro equipo a través de una conexión de red. Existen varios programas de software VNC gratis y de bajo costo disponibles. Estos incluyen tight VNC, Ultra VNC y Real VNC. El software VNC debe instalarse y ejecutarse en el equipo del presentador para que SuperNova realice una conexión. El software VNC no necesita instalarse en su equipo.

Para obtener más información de los programas VNC que se han probado y que Dolphin recomienda, visite el sitio web de Dolphin o póngase en contacto con su distribuidor local de Dolphin.

11.2.1 Conectarse al equipo del presentador

Puede conectarse al equipo del presentador que está ejecutando el software VNC creando un perfil de pizarra. Un perfil de pizarra requerirá que introduzca información específica, que solo puede estar disponible en su Administrador de red. Esta información incluye el nombre del equipo y cualquier contraseña de seguridad establecida en el software VNC.

Para crear un perfil de pizarra, haga lo siguiente en el panel de control de SuperNova:

1. En la opción "Visual", abra el submenú "Conectar y ver" y seleccione "Configuración". Se abre el cuadro de diálogo "Configuración de Conectar y ver".

2. Si este es un nuevo perfil que desea crear, seleccione la página "Pizarra" y elija el botón "Nuevo". Se abre el cuadro de diálogo "Configuración de Pizarra".

3. Si este es un perfil que desea editar, abra la página "Pizarra", seleccione el perfil de la lista "Dispositivos" y elija el botón "Configuración". Se abre el cuadro de diálogo "Configuración de Pizarra".

4. En el cuadro "Perfil" escriba un nombre para este perfil. Proporcione al perfil un nombre significativo, por ejemplo, el nombre de la clase, del profesor o del formador.

5. Complete los campos restantes como le proporcionó su Administrador de red. Para obtener más información, consulte el cuadro de diálogo Configuración de Conectar y ver.

6. Seleccione el botón "Aceptar". SuperNova guarda la configuración y regresa al cuadro de diálogo anterior.

7. Seleccione el botón "Aceptar". SuperNova guarda el perfil, lo agrega a la lista Dispositivos y cierra el cuadro de diálogo.

11.2.2 Ver el equipo del presentador

Para ver la pantalla del equipo del presentador se necesita que seleccione el perfil en el cuadro de diálogo "Configuración de Conectar y ver" y que active la característica de Conectar y ver.

Cuando esté conectado al equipo del presentador, puede usar las siguientes opciones para habilitar, configurar y ajustar el visor.

Encender el visor

Después de seleccionar el dispositivo en el cuadro de diálogo "Configuración de Conectar y ver", puede ver el resultado activando "Conectar y ver". También puede activar o desactivar "Conectar y ver" con las opciones "Visuales" del panel de control de SuperNova o usando una tecla de acceso rápido.

Teclas de acceso rápido del ampliador

Función	Escritorio: conjunto de teclado numérico predeterminado	Portátil: conjunto universal
Activar o desactivar Conectar y ver	ALT + TECL NUM INTRO	MAYÚS IZQUIERDA + BLOQ MAYÚS + 0

Cuando active "Conectar y ver", una parte de la pantalla empieza a mostrar la imagen de la cámara o la pizarra. Esta área se denomina visor. Puede cambiar la posición del visor en la pantalla y usar la barra de herramientas del visor para ajustar el tamaño, el color y el contraste de la imagen para facilitar su visualización.

Cambiar entre el visor y el escritorio

Para acceder a la barra de herramientas del visor y realizar ajustes en la imagen, es necesario que coloque el foco en el área del visor.

Puede alternar entre el visor y el escritorio presionando BLOQ MAYÚS + BOTÓN CENTRAL DEL MOUSE. Si dispone de cámara activa y conexión a pizarra activa, al presionar BLOQ MAYÚS + BOTÓN CENTRAL DEL MOUSE, se desplazará entre la cámara, la pizarra y el escritorio.

Mostrar y ocultar la barra de herramientas del visor

La barra de herramientas del visor le proporciona controles para modificar la imagen que está viendo. Las opciones disponibles en la barra de herramientas difieren dependiendo de si se ha establecido la conexión con una cámara o con una pizarra.

Puede utilizar los botones Mostrar y Ocultar para controlar la apariencia de la barra de herramientas del visor. Si oculta la barra de herramientas, se mostrará más información en el visor.

El estilo de los botones Mostrar y Ocultar variará según la ubicación del visor. Por ejemplo, si el visor está acoplado en la parte superior, los botones Mostrar y Ocultar aparecerán como flechas apuntando hacia la izquierda y la derecha.



Si la ventana del visor está acoplada en la parte izquierda, los botones Mostrar y Ocultar aparecerán como flechas apuntando arriba y abajo.



En todos los casos, el botón Ocultar aparecerá siempre en la última posición de la barra de herramientas del visor.

También puede ocultar la barra de herramientas del visor presionando CONTROL IZQUIERDO + BARRA DIAGONAL INVERTIDA.

Ampliar la imagen en el visor



Puede cambiar el tamaño de la imagen en el visor usando los botones de ampliación de la barra de herramientas del visor. Si usa un dispositivo con pantalla táctil, también puede cambiar la ampliación reduciendo o expandiendo con dos dedos.

También puede usar las siguientes teclas de acceso rápido:

Teclas de acceso rápido del ampliador

Función	Teclas de acceso rápido del escritorio	Portátil: conjunto universal
Aumentar ampliación	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM MÁS o BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ARRIBA	ALT + SIGNO IGUAL o BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ARRIBA

Reducir ampliación	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM MENOS o BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ABAJO	ALT + GUIÓN o BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ABAJO

Ver otras partes de la imagen

Si la imagen que está examinando es mayor de lo que parecía en el visor, puede mover el puntero del mouse o usar la función panorámica de SuperNova para desplazarse por la imagen con el teclado.

Para hacer una panorámica por la pantalla, presione CONTROL DERECHO más una tecla de flecha. Mantenga pulsado el CONTROL DERECHO para continuar con la panorámica. Presione la misma tecla de flecha repetidamente (manteniendo pulsado el CONTROL DERECHO) para aumentar la velocidad de la panorámica. Presione la tecla de flecha opuesta para reducir la velocidad.

Para obtener más información sobre la panorámica, consulte "Ver otras partes de la pantalla".

Cambiar los colores de la imagen



Si le resulta difícil ver la imagen debido a los colores y el contraste, puede usar el botón Cambiador de colores para alternar entre varios esquemas de color diferentes.

También puede recorrer los esquemas de color disponibles presionando CONTROL IZQUIERDO + 0 en el teclado numérico.

SuperNova guardará el esquema de color que elija en el cuadro de diálogo "Configuración de Conectar y ver".

Hacer un seguimiento del movimiento del presentador



Puede controlar el seguimiento del movimiento del presentador usando el botón Seguir al presentador. Cuando activa esta característica, la imagen del visor se desplazará automáticamente para seguir el movimiento del puntero del mouse del presentador por la pantalla. El seguimiento del puntero del mouse del presentador se detendrá temporalmente si empieza a mover su puntero del mouse y el seguimiento se reanuda de nuevo cuando deje de moverlo.

Puede evitar que el visor siga el puntero del mouse del presentador desactivando esta característica.

Bloquear la imagen



El botón Bloquear imagen le permite congelar la pantalla de la imagen actual. Esto le permite explorar la imagen con más detalle sin la posibilidad del cambio de imagen.

Aunque al igual que la barra de herramientas del visor está disponible al usar una cámara, puede que encuentre esta opción más útil al ver presentaciones ya que le permitirá congelar la pantalla en una diapositiva concreta en vez de depender del profesor para que detenga la presentación en ese punto. Cuando desbloquee una imagen, el visor actualiza la imagen de la cámara actual o muestra la pantalla del equipo del presentador actual.

Capturar imagen del visor



El botón Capturar imagen le permite copiar la imagen del visor en el portapapeles de Windows. La imagen que captura SuperNova es la imagen completa, independientemente de la medida del magnificador que esté usando en el visor.

Si se presiona BLOQ MAYÚS + P, también se copia la imagen del visor en el portapapeles de Windows.

11.2.3 Configuración de pizarra

Puede encontrar toda la configuración Conectar y ver de la pizarra de SuperNova en el panel de control de SuperNova. Puede encontrar estas opciones a través de la barra de botones Visuales o a través del menú Conectar y ver. Para obtener más información consulte el cuadro de diálogo Configuración de Conectar y ver.

CAPÍTULO 11

Pantalla táctil

12.1 Terminología de la pantalla táctil

La tabla siguiente ofrece una descripción de los gestos de pantalla táctil y su significado.

Gesto	Cómo hacerlo
Pulsación	Pulsar la pantalla para realizar una acción (por ejemplo, pulsar un botón para activarlo). Algunos gestos precisan pulsar la pantalla con 1, 2, 3 o más dedos varias veces.
Presionar y mantener	Presionar la pantalla con un dedo sin dejar de ejercer la presión.
Pasar el dedo	Pasar el dedo por la pantalla.
Deslizar	Movimiento más largo y lento por la pantalla con un dedo, generalmente en sentido horizontal o vertical desde el borde de la pantalla.
Reducir	Presionar la pantalla con dos dedos y juntarlos, reduciendo el espacio entre ellos.

Expandir	Presionar la pantalla con dos dedos y separarlos, expandiendo el espacio entre ellos.

12.2 Gestos de pantalla táctil

La tabla siguiente ofrece una lista de los gestos de pantalla táctil con los que puede controlar SuperNova.

Función	Gesto
Activar el Magnificador	Pulsación doble con 3 dedos
Aumentar el Magnificador	Expandir con 2 dedos
Reducir el Magnificador	Reducir con 2 dedos
Panorámica	Deslizar 1 dedo
Mostrar u ocultar la barra táctil de SuperNova	Pulsación sencilla con 3 dedos

Más gestos

Además de los gestos de pantalla táctil de SuperNova, estos otros le ayudarán a interactuar con Windows.

Función	Gesto
Abrir los accesos (a Buscar, Recurso compartido, Inicio, Dispositivos y Configuración).	Deslizar 1 dedo desde el borde derecho.
Cambiar entre aplicaciones.	Deslizar 1 dedo desde el borde izquierdo.

Abrir el menú de aplicación. El menú de aplicación muestra comandos como Guardar, Editar y Eliminar.	Deslizar 1 dedo desde el borde inferior.
Cerrar la aplicación abierta.	Deslizar 1 dedo desde el borde superior y continuar el movimiento para arrastrar la aplicación hacia la parte inferior de la pantalla.
Abrir el menú contextual (equivalente a hacer clic con el botón secundario en un elemento seleccionado).	Pulsación doble con 1 dedo, mantener y soltar.
Arrastrar y colocar objetos en la pantalla (por ejemplo, al reorganizar la pantalla Inicio o el escritorio).	Pulsación doble con 1 dedo, mantener y deslizar para mover el objeto. Levantar el dedo para soltar.

12.3 Barra táctil de SuperNova

La barra táctil de SuperNova es una barra táctil de herramientas que aparece en la parte inferior de la pantalla al realizar una pulsación sencilla con 3 dedos. La barra táctil ofrece acceso a las acciones más frecuentes de SuperNova, como activar o desactivar el Magnificador, cambiar la medida de este y activar o desactivar el esquema de color de SuperNova.



12.4 Escribir en una pantalla táctil

SuperNova muestra automáticamente un teclado táctil si es necesario escribir y no se ha conectado ningún teclado al dispositivo. El teclado en

pantalla aparece en la parte inferior de esta e incluye teclas de gran tamaño y alto contraste.

Siempre que lo desee puede hacer que aparezca este teclado. Para ello, pulse el botón Teclado de la barra táctil de SuperNova o del área de notificación de Windows. Para ocultar el teclado en pantalla, pulse el botón X de gran tamaño que aparece en su esquina inferior derecha.

También puede ajustar el aspecto del teclado en pantalla desde el cuadro de diálogo Configuración de pantalla táctil.

12.5 Ajustar la sensibilidad táctil

Si lo desea, puede ajustar la sensibilidad de SuperNova a las pulsaciones y los deslizamientos que se realizan en la pantalla táctil.

Por ejemplo, si detecta que SuperNova interpreta un gesto de doble pulsación como dos gestos de pulsación sencilla, deberá aumentar el tiempo de espera de pulsación doble. Del mismo modo, si detecta que al intentar arrastrar y colocar un icono del escritorio, este no se selecciona, deberá aumentar el tiempo de espera de pulsación doble o de paso a través.

Puede cambiar la configuración de la pantalla táctil de SuperNova en el cuadro de diálogo Pantalla táctil.

CAPÍTULO 12

Conflictos de teclas de acceso rápido

En ocasiones, puede ocurrir que las teclas de acceso rápido de SuperNova entren en conflicto con las de otra aplicación. Puede resolver este problema de varias formas diferentes.

13.1 Desactivación de las teclas de acceso rápido de SuperNova

Puede resolver un conflicto de teclas de acceso rápido entre SuperNova y su aplicación desactivando las teclas de acceso rápido de SuperNova. De este modo se deshabilitan todas las teclas de acceso rápido excepto la que se emplea para volver a activar las teclas de acceso rápido de SuperNova.

Teclas de acceso rápido de acción

Función	Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado	Portátil: Conjunto universal
Activar o desactivar las teclas de acceso rápido	CONTROL IZQUIERDO + 8	MAYÚS + BLOQ MAYÚS + 3

13.2 Indicar a SuperNova que debe ignorar la siguiente pulsación de tecla

Puede resolver un conflicto de teclas de acceso rápido entre SuperNova y su aplicación indicando a SuperNova que debe ignorar la siguiente

pulsación de tecla. Después de soltar las teclas, SuperNova volverá a activar automáticamente sus teclas de acceso rápido.

Teclas de acceso rápido de acción

Función	Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado	Portátil: Conjunto universal
Pasar la siguiente pulsación de tecla a la aplicación	CONTROL IZQUIERDO + 7	BLOQ MAYÚS + 3

13.3 Reasignar una tecla de acceso rápido de SuperNova

Puede agregar, eliminar o reasignar cualquier tecla de acceso rápido de SuperNova. Puede hacerlo para resolver conflictos entre las teclas de acceso rápido de SuperNova y la aplicación, o para cambiar el comando de una tecla de acceso rápido por una combinación de teclas más fácil de usar.

Para hacerlo:

1. Presione CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA.

   Se abrirá el panel de control de SuperNova.

2. Presione ALT + G.

   Se abrirá el menú General.

3. Presione FLECHA ABAJO hasta Teclado y teclas de acceso rápido y presione ENTRAR.

   Se abrirá un submenú.

4. Presione FLECHA ABAJO hasta Teclas de acceso rápido y presione ENTRAR.

   Se abrirá el cuadro de diálogo Teclas de acceso rápido.

5. Presione TAB para desplazarse y, en las listas Conjunto de comandos de teclas de acceso rápido y Comando, seleccione la tecla de acceso rápido asignada que desea cambiar.

6. Use los botones Agregar tecla, Sustituir tecla o Quitar tecla para cambiar la tecla de acceso rápido.

7. Presione TAB hasta el botón Aceptar y, a continuación, presione la BARRA ESPACIADORA.

SuperNova confirmará los cambios y cerrará el cuadro de diálogo.

Sugerencia: Si le resulta difícil encontrar una tecla de acceso rápido entre las categorías y los comandos disponibles, use la descripción de teclas de SuperNova.

CAPÍTULO 13

Teclas de acceso rápido

14.1 Acciones

Función	Equipo de sobremesa: conjunto de teclado numérico predeterminado	Portátil: conjunto universal
Lector de documentos	MAYÚS + ALT + D	BLOQ MAYÚS + F11
Ayuda de SuperNova	MAYÚS + F1 o CONTROL DERECHO + MAYÚS DERECHA + GUIÓN CORTO	MAYÚS + F1
Activar o desactivar teclas de acceso rápido	CONTROL IZQUIERDO + 8	MAYÚS + BLOQ MAYÚS + 3
Abrir Panel de control	CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA	CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA
Pasar la siguiente tecla a la aplicación	CONTROL IZQUIERDO + 7	BLOQ MAYÚS + 3
Salir	BLOQ MAYÚS + F4	BLOQ MAYÚS + F4
Conmutación del modo de fila/columna	CONTROL IZQUIERDO + 9	Sin asignación

Actualización de pantalla	CONTROL IZQUIERDO + Ñ	BLOQ MAYÚS + ESCAPE

14.2 Magnificador

Función	Ordenador de sobremesa: conjunto de teclado numérico predeterminado	Portátil: Universal
Esquema de color activado o desactivado	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 0	MAYÚS + ALT + C
Crear un área enganchada	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 5	MAYÚS IZQUIERDA + CONTROL IZQUIERDA + ALT + H
Realces de foco activados o desactivados	CONTROL IZQUIERDO + MAYÚS IZQUIERDA + BARRA DIAGONAL INVERSA	MAYÚS IZQUIERDA + ALT IZQUIERDA + O
Áreas enlazadas activadas o desactivadas	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 3	Sin asignación
Saltar abajo	CONTROL IZQUIERDO + BLOQ MAYÚS + TECL NUM 2	ALT IZQUIERDA + AV PÁG
Saltar a la izquierda	CONTROL IZQUIERDO + BLOQ MAYÚS + TECL NUM 4	ALT IZQUIERDA + INICIO

Saltar a la derecha	CONTROL IZQUIERDO + BLOQ MAYÚS + TECL NUM 6	ALT IZQUIERDA + FIN
Saltar arriba	CONTROL IZQUIERDO + BLOQ MAYÚS + TECL NUM 8	ALT IZQUIERDA + RE PÁG
Disminución del Magnificador	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM MENOS o BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ABAJO	ALT IZQUIERDA + MENOS o BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ABAJO
Aumento del Magnificador	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM MÁS o BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ARRIBA	ALT IZQUIERDA + IGUAL o BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ARRIBA
Disminución de la X de ampliación	CONTROL DERECHO + TECL NUM BARRA DIAGONAL	Sin asignación
Aumento de la X de ampliación	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM BARRA DIAGONAL	Sin asignación

Disminución de la Y de ampliación	CONTROL DERECHO + TECL NUM ASTERISCO	Sin asignación
Aumento de la Y de ampliación	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM ASTERISCO	Sin asignación
Magnificador activado o desactivado	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM INTRO	ALT + 0
Modificar las áreas enlazadas	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 6	MAYÚS IZQUIERDA + ALT + H
Modificar el área principal	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 4	MAYÚS IZQUIERDA + ALT + A
Bajar	CONTROL DERECHO + MAYÚS DERECHA + FLECHA ABAJO	CONTROL DERECHO + MAYÚS DERECHA + FLECHA ABAJO
A la izquierda	CONTROL DERECHO + MAYÚS DERECHA + FLECHA IZQUIERDA	CONTROL DERECHO + MAYÚS DERECHA + FLECHA IZQUIERDA
A la derecha	CONTROL DERECHO + MAYÚS DERECHA + FLECHA DERECHA	CONTROL DERECHO + MAYÚS DERECHA + FLECHA DERECHA
Bajar a la parte inferior izquierda de la pantalla	CONTROL DERECHO + TECL NUM 1	Sin asignación

Bajar a la parte inferior de la pantalla	CONTROL DERECHO + TECL NUM 2	Sin asignación
Bajar a la parte inferior derecha de la pantalla	CONTROL DERECHO + TECL NUM 3	Sin asignación
Ir al borde izquierdo de la pantalla	CONTROL DERECHO + TECL NUM 4	Sin asignación
Ir a la mitad de la pantalla	CONTROL DERECHO + TECL NUM 5	Sin asignación
Ir al borde derecho de la pantalla	CONTROL DERECHO + TECL NUM 6	Sin asignación
Subir a la parte superior izquierda de la pantalla	CONTROL DERECHO + TECL NUM 7	Sin asignación
Subir a la parte superior de la pantalla	CONTROL DERECHO + TECL NUM 8	Sin asignación
Subir a la parte superior derecha de la pantalla	CONTROL DERECHO + TECL NUM 9	Sin asignación
Subir	CONTROL DERECHO + MAYÚS DERECHA + FLECHA ARRIBA	CONTROL DERECHO + MAYÚS DERECHA + FLECHA ARRIBA
Cambio de orientación	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 1	Sin asignación
Modo de visión global activado o desactivado	CONTROL IZQUIERDO + BARRA DIAGONAL INVERSA	Sin asignación

Panorámica hacia abajo	CONTROL DERECHO + FLECHA ABAJO	CONTROL DERECHO + FLECHA ABAJO
Panorámica hacia la izquierda	CONTROL DERECHO + FLECHA IZQUIERDA	CONTROL DERECHO + FLECHA IZQUIERDA
Panorámica hacia la derecha	CONTROL DERECHO + FLECHA DERECHA	CONTROL DERECHO + FLECHA DERECHA
Panorámica hacia arriba	CONTROL DERECHO + FLECHA ARRIBA	CONTROL DERECHO + FLECHA ARRIBA
Cambio de tipo de magnificador principal	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 7	MAYÚS IZQUIERDA + ALT + M
Restaurar la posición	CONTROL DERECHO + TECL NUM PUNTO	Sin asignación
Guardar la posición	CONTROL DERECHO + TECL NUM 0	Sin asignación
Cambiar monitores	BLOQ MAYÚS + BOTÓN CENTRAL DEL MOUSE	BLOQ MAYÚS + BOTÓN CENTRAL DEL MOUSE
Cambio de suavizado de texto (True Type/Estándar/Desactivado)	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 8	Sin asignación
Fuentes negrita activadas o desactivadas	CONTROL DERECHO + TECL NUM 8	Sin asignación

Refinamiento de la nitidez activada o desactivada	CONTROL DERECHA + MAYÚS DERECHA + TECL NUM 8	Sin asignación

14.3 Ajuste de la ventana del magnificador

Función	Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado	Portátil: Conjunto universal
Alterar gancho con mouse	BOTÓN PRIMARIO DEL MOUSE	BOTÓN PRIMARIO DEL MOUSE
Área hacia abajo	FLECHA ABAJO	FLECHA ABAJO
Área hacia la izquierda	FLECHA IZQUIERDA	FLECHA IZQUIERDA
Área hacia la derecha	FLECHA DERECHA	FLECHA DERECHA
Área hacia arriba	FLECHA ARRIBA	FLECHA ARRIBA
Cancelar obtener área de gancho	ESCAPE	ESCAPE
Contenido hacia abajo	MAYÚS IZQUIERDA + FLECHA ABAJO	MAYÚS IZQUIERDA + FLECHA ABAJO
Contenido hacia la izquierda	MAYÚS IZQUIERDA + FLECHA IZQUIERDA	MAYÚS IZQUIERDA + FLECHA IZQUIERDA

Contenido hacia la derecha	MAYÚS IZQUIERDA + FLECHA DERECHA	MAYÚS IZQUIERDA + FLECHA DERECHA
Contenido hacia arriba	MAYÚS IZQUIERDA + FLECHA ARRIBA	MAYÚS IZQUIERDA + FLECHA ARRIBA
Cambiar la orientación	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 1	Sin asignación
Reducir la ampliación	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM MENOS o BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ABAJO	ALT + COMILLAS SIMPLES o BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ABAJO
Reducir la ampliación X	CONTROL DERECHO + TECL NUM BARRA	Sin asignación
Reducir la ampliación Y	CONTROL DERECHO + TECL NUM ASTERISCO	Sin asignación
Eliminar el área enganchada	SUPR	SUPR
Salir del modo de modificación	ESCAPE	ESCAPE

Aumentar la ampliación	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM MÁS o BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ABAJO	ALT + EXCLAMACIÓN DE APERTURA o BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ARRIBA
Aumentar la ampliación X	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM BARRA	Sin asignación
Aumentar la ampliación Y	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM ASTERISCO	Sin asignación
Estrechar	CONTROL IZQUIERDO + FLECHA IZQUIERDA	CONTROL IZQUIERDO + FLECHA IZQUIERDA
Recortar	CONTROL IZQUIERDO + FLECHA ARRIBA	CONTROL IZQUIERDO + FLECHA ARRIBA
Alargar	CONTROL IZQUIERDO + FLECHA ABAJO	CONTROL IZQUIERDO + FLECHA ABAJO
Ampliar	CONTROL IZQUIERDO + FLECHA DERECHA	CONTROL IZQUIERDO + FLECHA DERECHA
Mover el área con el mouse	Z	Z
Mover el contenido del área con el mouse	C	C

Aceptar obtener área de gancho	INTRO o BOTÓN SECUNDARIO DEL MOUSE	INTRO o BOTÓN SECUNDARIO DEL MOUSE
Redimensionar el área con el mouse	X	X
Suavizado de texto	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 8	Sin asignación
Seguimiento activado o desactivado	MAYÚS IZQUIERDA + TECL NUM 8	Sin asignación

14.4 Vista de líneas

Función	Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado	Portátil: Conjunto universal
Reducir la ampliación	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM MENOS o BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ABAJO	ALT + MENOS o BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ABAJO
Reducir la ampliación X	CONTROL DERECHO + TECL NUM BARRA DIAGONAL	Sin asignación

Reducir la ampliación Y	CONTROL DERECHO + TECL NUM ASTERISCO	Sin asignación
Salir de la vista de líneas	ESCAPE	ESCAPE
Salir de vista líneas y hacer clic en carácter o enrutar el cursor de Dolphin a carácter	TECL NUM INTRO	INTRO o BOTÓN PRIMARIO DEL MOUSE
Saltar hacia adelante	INTRO	INTRO
Ir a la primera línea	INICIO	INICIO
Ir al foco	TECL NUM 0	F5
Ir a la última línea	FIN	FIN
Aumentar la ampliación	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM MÁS o BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ARRIBA	ALT + IGUAL o BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ARRIBA
Aumentar la ampliación X	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM BARRA DIAGONAL	Sin asignación
Aumentar la ampliación Y	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM ASTERISCO	Sin asignación
Documento de vista de líneas	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM PUNTO	Sin asignación

Área de documento de vista de líneas e ir al foco	CONTROL IZQUIERDO + MAYÚS IZQUIERDA + TECL NUM 2	Sin asignación
Documento de vista de líneas desde el cursor	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 2	MAYÚS IZQUIERDA + ALT + L
Ventana completa de vista de líneas	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 9	MAYÚS IZQUIERDA + ALT + V
Retroceder	FLECHA IZQUIERDA	FLECHA IZQUIERDA
Avanzar	FLECHA DERECHA	FLECHA DERECHA
Línea siguiente	AV PÁG	AV PÁG
Línea anterior	RE PÁG	RE PÁG
Desplazar más rápidamente	FLECHA ARRIBA	FLECHA ARRIBA
Desplazar más lentamente	FLECHA ABAJO	FLECHA ABAJO
Iniciar o detener	BARRA ESPACIADORA	BARRA ESPACIADORA
Suavizado de texto	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 8	Sin asignación

14.5 Buscador de elementos

Función	Ordenador de sobremesa: conjunto de teclado numérico predeterminado	Portátil: conjunto universal
Buscador de elementos (cuadro de diálogo con varias fichas)	BLOQ MAYÚS + TAB	BLOQ MAYÚS + TAB
Vínculos	BLOQ MAYÚS + 1	BLOQ MAYÚS + F7
Encabezados	BLOQ MAYÚS + 2	BLOQ MAYÚS + F6
Marcos u objetos	BLOQ MAYÚS + 3	BLOQ MAYÚS + F9
Tablas	BLOQ MAYÚS + 5	Sin asignación
Controles	BLOQ MAYÚS + 6	BLOQ MAYÚS + F5
Revisiones o comentarios	BLOQ MAYÚS + 7	MAYÚS IZQUIERDA + BLOQ MAYÚS + R
Errores	BLOQ MAYÚS + 8	Sin asignación

14.6 Teclas de desplazamiento rápido para Microsoft Word

El código de SuperNova incluye la siguiente lista de teclas de acceso rápido para las versiones compatibles de Microsoft Word. Estos comandos de teclado no pueden quitarse ni reasignarse.

14.6.1 Teclas de exploración rápida

Para desplazarse al elemento anterior, use Mayús + Bloq Mayús + Tecla

Desplazar a	Tecla de acceso rápido
Marcador	BLOQ MAYÚS + A
Botón	BLOQ MAYÚS + B
Comentario	BLOQ MAYÚS + C
Estilo de párrafo diferente	BLOQ MAYÚS + D
Campo Editar formulario	BLOQ MAYÚS + E
Nota al pie o nota al final	BLOQ MAYÚS + F
Gráfico	BLOQ MAYÚS + G
Estilo de encabezado	BLOQ MAYÚS + H
Elemento de lista	BLOQ MAYÚS + I
Vínculo	BLOQ MAYÚS + K
Lista	BLOQ MAYÚS + L
Cuadro de texto	BLOQ MAYÚS + Y
Párrafo de estilo normal	BLOQ MAYÚS + N
Objeto (incluidos gráficos)	BLOQ MAYÚS + O
Párrafo	BLOQ MAYÚS + P
Revisión	BLOQ MAYÚS + R
Tabla	BLOQ MAYÚS + T
Casilla de verificación	BLOQ MAYÚS + X
Salto de sección	BLOQ MAYÚS + Z

Recuerde que es posible que varias teclas de exploración rápida no funcionen cuando trabaja en un documento protegido.

14.7 Teclas de acceso rápido por capas

El modo de teclas de acceso rápido por capas proporciona una forma alternativa de acceder a los valores más populares. Presione BLOQ MAYÚS + BARRA ESPACIADORA para entrar en el modo de teclas de acceso rápido por capas.

En este modo, puede:

- Presionar TAB y MAYÚS + TAB para explorar las opciones disponibles en el nivel actual. Al seleccionar una opción, puede presionar INTRO para explorar las subopciones o para seleccionar un elemento.

- Puede usar las teclas de acceso directo para ir directamente a una opción específica.

Por lo general, siempre saldrá automáticamente del modo de teclas de acceso rápido por capas tras ejecutar una opción.

Como se mencionó anteriormente, al presionar BLOQ MAYÚS + BARRA ESPACIADORA se entra en un modo especial de teclas de acceso rápido por capas donde SuperNova asume el control del teclado. Las pulsaciones de teclas específicas realizan acciones, cambian la configuración o desplazan al usuario a capas distintas. Las capas figuran en una capa superior. Este es el punto de partida. No puede navegar a una capa anterior desde aquí.

Teclas generales en el modo por capas:

- BLOQ MAYÚS + BARRA ESPACIADORA: entrar en el modo por capas.

- ESCAPE: salir del modo por capas.

- RETROCESO: desplazarse a la capa anterior.

- TAB: desplazarse a la entrada siguiente en la capa actual.

- MAYÚS + TAB: desplazarse a la entrada anterior en la capa actual.

- INTRO: seleccionar la entrada actual en la capa actual.

- F1: leer las entradas en la capa actual.

Notas:

Algunas capas son específicas por área. Por ejemplo, solo puede acceder a la capa Tabla cuando está enfocado dentro de una tabla.

Al cambiar de perfil, cambiarán las capas disponibles. No obtendrá capas de voz en el perfil de Ampliador ni las capas de aumento en ScreenReader.

Algunas capas, como Tabla, también le mantendrán en el modo por capas después de realizar una acción. Puede salir del modo por capas presionando ESCAPE o una tecla no utilizada en la capa actual.

La capa superior contiene las capas siguientes:

- Ampliación, M

Para seleccionar la capa Ampliación, presione M y:

- Activar/Desactivar, O
- Aumentar, FLECHA ARRIBA
- Disminuir, FLECHA ABAJO
- Cambiador de color, C
- Capa Vista, V

Capa Vista:

- Pantalla completa, F
- Ventana, W
- Dividir a la izquierda, FLECHA IZQUIERDA
- Dividir arriba, FLECHA ARRIBA
- Dividir a la derecha, FLECHA DERECHA
- Dividir abajo, FLECHA ABAJO

ZoomText para la guía de terminología del producto SuperNova

La siguiente tabla proporciona una guía de conversión de terminología útil para usuarios de ZoomText que pasan a SuperNova.

Término de ZoomText	Equivalente en SuperNova
AppReader	Leer desde aquí
Cámara	Conectar y ver (page 49)
Mejoras del color	Esquemas de color (see "Mejorar la visualización de la pantalla" page 25)
Teclas comando	Teclas de acceso rápido
Mejoras del cursor	Opciones de realce ->Cursor
Lector de documentos	Lector de documentos (page 33)
Monitor dual	Monitor múltiple (see "Cuadro de diálogo Visual > Varios monitores" page 107)
Tinte	Matiz (page 95)
Buscador	Buscador de item (see "Buscador de elementos" page 83)
Mejoras del foco	Opciones de realce ->Foco (see "Facilitar la visualización del foco" page 26)
Mejoras de fuente	Suavizado de fuente (page 111)
Ventana de inmovilización	Área enlazada (see "Crear ventanas magnificadas estáticas para mostrar información" page 19)
Eco del mouse	Anunciar el texto bajo el mouse

Mejoras del puntero	Opciones de realce ->Mouse
Combinación del puntero	Punteros del mouse (see "Facilitar la visualización del puntero" page 27)
Buscador de texto	Buscar con el cursor de Dolphin
Procesamiento de texto	Anuncios de estilo de texto
Comandos para la lectura de texto	Teclas de voz
Eco al teclear	Eco de caracteres
Modo de visión	Modo de visión global (see "Visión global de la posición de la ventana magnificada" page 19)
Tipo de ventana	Vista de magnificador (see "Cambiar la Vista de Magnificador" page 12)
Buscador web	Buscador de item (see "Buscador de elementos" page 83)
Nivel de zoom	Medida de magnificación (see "Cambiar la medida del Magnificador" page 11)

CAPÍTULO 14

Referencia

16.1 Cuadro de diálogo New Situation Settings (Nueva configuración de situación)

Menú: File (Archivo) > New (Nuevo) > Situation Settings (Configuración de situación)

Puede crear o elegir una situación que ya exista con las opciones del cuadro de diálogo "New Situation Settings" (Nueva configuración de situación).

Opciones:

- Botón de opción Create New Situation (Crear una situación nueva).
  Para crear una configuración de situación nueva, puede seleccionar este botón de opción y, a continuación, seleccionar el botón "OK" (Aceptar). Esta acción le llevará al siguiente paso del proceso de creación. Para consultar todos los pasos de este proceso, vaya al tema "Crear una configuración de situación".

- Botón de opción Use an existing Situation (Utilizar una situación existente).
  Para cambiar la situación, seleccione esta opción y, a continuación, seleccione una opción de las disponibles en la lista. Tenga en cuenta que, en la lista de situaciones, aparecerán solamente las configuraciones de situación disponibles en el archivo de configuración de situaciones actual.

16.2 Cuadro de diálogo New Application Settings (Nueva configuración de aplicación)

Menú: File (Archivo) > New (Nuevo) > Application Settings (Configuración de aplicación)

Para crear o elegir un archivo ya existente de configuración de la aplicación, puede utilizar las opciones del cuadro de diálogo Application Settings (Configuración de aplicación).

Opciones:

- Botón de opción Create a new settings file (Crear un archivo de configuración nuevo).
  Para crear un archivo nuevo de configuración de la aplicación, puede seleccionar esta opción y, a continuación, seleccionar el botón "OK" (Aceptar). Al seleccionar el botón "OK" (Aceptar), continuará con el siguiente paso del proceso de creación. Para consultar todos los pasos de este proceso, véase el tema "Crear una configuración de aplicación".

- Botón de opción Use an existing settings file (Utilizar un archivo de configuración existente).
  Para cambiar de archivo de configuración, puede seleccionar esta opción y, a continuación, seleccionar un archivo de los disponibles en la lista. Confirme su elección seleccionando el botón "OK" (Aceptar). La configuración se aplicará inmediatamente, salvo que seleccione la opción "Use Default Settings in the control panel" (Usar la configuración predeterminada en el panel de control). Si selecciona esta opción, la configuración nueva se aplicará cuando vuelva a su aplicación.

16.3 Cuadro de diálogo New Map (Mapa nuevo)

Menú: File (Archivo) > New (Nuevo) > Map (Mapa)

Para crear o elegir un archivo de mapas ya existente, puede utilizar las opciones del cuadro de diálogo "Select New Map" (Seleccionar mapa nuevo).

Opciones:

- Botón de opción Create a new Map file (Crear un archivo de mapas nuevo).
  Para crear un archivo de mapas nuevo, puede seleccionar este botón de opción y, a continuación, seleccionar el botón "OK" (Aceptar). Esta acción le llevará al siguiente paso del proceso de creación. Para conocer todos los pasos de este proceso, consulte la Guía de asignación. La encontrará en el menú "Help" (Ayuda) de SuperNova.

- Botón de opción Use an existing Map file (Utilizar un archivo de mapas existente).
  Para cambiar de archivo de mapas, puede seleccionar esta opción y, a continuación, seleccionar un archivo de los disponibles en la lista. Para obtener más información acerca de los motivos por los que podría cambiar un archivo de mapas, consulte el tema "Cambiar el archivo de mapas".

16.4 Elemento del menú New Script (Nueva secuencia de comandos)

Menú: File (Archivo) > New (Nuevo) > Script (Secuencia de comandos)

Para crear un archivo nuevo de secuencia de comandos para la aplicación actual, puede seleccionar este elemento del menú. El nuevo archivo de secuencia de comandos se abrirá en el Editor de secuencias de comandos de Dolphin. El Editor de secuencias de comandos de Dolphin incluye el menú "Help" (Ayuda), con opciones vinculadas a la Guía de secuencias de comandos.

Nota: si ya existe un archivo de secuencia de comandos para la aplicación actual, este elemento del menú estará deshabilitado. Para ver y editar un archivo de secuencia de comandos ya existente, vaya al menú "File" (Archivo), submenú "Edit" (Editar), y seleccione "Script" (Secuencia de comandos).

16.5 Cuadro de diálogo Edit Situation Settings (Editar configuración de situación)

Menú: File (Archivo) > Edit (Editar) > Situation Settings (Configuración de situación)

Para eliminar o cambiar las propiedades de su configuración de situación, puede utilizar las opciones del cuadro de diálogo "Situation Management" (Administración de la situación). Es necesario que esté utilizando el archivo de configuración de aplicación que contiene la configuración de situación para que pueda editar las situaciones de dicho archivo.

- Lista Situation (Situación).
  Puede elegir la situación que desee editar o eliminar de esta lista.

- Botón Edit Rules (Editar las reglas).
  Al seleccionar este botón, puede editar las reglas de una situación. Se abrirá el cuadro de diálogo "Define Situation Rules" (Definir las reglas de la situación). En este cuadro de diálogo, puede cambiar el nombre de la situación, cambiar el nombre y los detalles de clase de la regla de situación, y agregar y quitar reglas de situación.

- Botón Delete (Eliminar).
  Seleccionando este botón, puede eliminar la situación actual del archivo de configuración de aplicación. Al seleccionar el botón, recibirá un mensaje de advertencia y deberá confirmar que desea continuar. Para seguir adelante, seleccione el botón "Yes" (Sí); para cancelar, seleccione el botón "No".

16.6 Cuadro de diálogo Edit Application Settings (Editar configuración de aplicación)

Menú: File (Archivo) > Edit (Editar) > Application Settings (Configuración de aplicación)

Para eliminar o cambiar las propiedades de su configuración de aplicación, puede utilizar las opciones del cuadro de diálogo "Settings File Management" (Administrar archivos de configuración).

- Lista de archivos Application Settings (Configuración de aplicación). Puede elegir el archivo de configuración de aplicación que desee editar o eliminar de esta lista. El archivo de configuración "Default Application" (Aplicación predeterminada) no se puede eliminar porque es un archivo del sistema de SuperNova.

- Botón Properties (Propiedades).
  Puede editar las propiedades de un archivo de configuración de aplicación con este botón. Se abrirá el cuadro de diálogo "Settings File Properties" (Propiedades del archivo de configuración). En este cuadro de diálogo, puede cambiar el nombre y el número de versión del archivo de configuración, así como agregar y quitar aplicaciones asociadas al archivo.

- Botón Delete this settings file (Eliminar este archivo de configuración). Seleccionando este botón, puede eliminar el archivo de configuración de aplicación actual. Al seleccionar el botón, recibirá un mensaje de advertencia y deberá confirmar que desea continuar. Para seguir adelante, seleccione el botón "Yes" (Sí); para cancelar, seleccione el botón "No".

16.7 Cuadro de diálogo Edit Map (Editar mapa)

Menú: File (Archivo) > Edit (Editar) > Map (Mapa)

Puede editar las propiedades y las reglas de un archivo de mapas seleccionando este elemento del menú. Para obtener más información acerca de los archivos de mapas, consulte la Guía de asignación, que encontrará en el menú "Help" (Ayuda) del panel de control de SuperNova.

Este cuadro de diálogo contiene también opciones de secuencias de comandos. Puede crear, volver a cargar, editar y eliminar archivos de secuencias de comandos y archivos de secuencias de comandos de extensión. Para obtener más información acerca de los archivos de secuencias de comandos, consulte la Guía de asignación. Puede abrir la Guía de asignación desde el menú "Help" (Ayuda) del panel de control de SuperNova.

16.8 Elemento del menú Edit Script (Editar secuencia de comandos)

Menú: File (Archivo) > Edit (Editar) > Script (Secuencia de comandos)

Para editar el archivo de secuencia de comandos de la aplicación actual, puede seleccionar este elemento del menú. El archivo de secuencia de comandos se abrirá en el Editor de secuencias de comandos de Dolphin. El Editor de secuencias de comandos de Dolphin incluye el menú "Help" (Ayuda), con opciones vinculadas a la Guía de secuencias de comandos.

Nota: si no hay ningún archivo de secuencia de comandos para la aplicación actual, este elemento del menú estará deshabilitado. Para crear un archivo nuevo de secuencia de comandos, vaya al menú "File" (Archivo), submenú "New" (Nuevo), y seleccione "Script" (Secuencia de comandos).

16.9 Cuadro de diálogo visual Configurar combinación de colores personalizada

Menú: Visual > Combinaciones de colores > Configurar.

Puede crear su propia combinación de colores usando las opciones del cuadro de diálogo "Configurar combinación de colores personalizada".

Nota: Para abrir este cuadro de diálogo debe elegir "Personalizar" como su Combinación de colores y, a continuación, elegir "Configurar" de la lista de Combinaciones de colores.

Puede crear una combinación personalizada en este cuadro de diálogo usando una de las siguientes opciones:

- Clásica
- Matiz
- Matiz dual
- Matiz agudo

- Matiz cuádruple
- Reemplazo del color

Los controles disponibles en este cuadro de diálogo cambian dependiendo de la configuración personalizada que haya elegido.

16.9.1 Opciones de combinación de colores personalizada clásica.

- Casilla Invertir el brillo.
  Esta opción invierte el brillo de la pantalla, de modo que las pantallas habituales con elementos oscuros sobre fondo claro pasan a ser elementos claros sobre fondo oscuro. Esta opción no afecta la cantidad de color de la pantalla.

- Control deslizante Contraste.
  El control deslizante "Contraste" controla la definición de color, haciendo que los colores claros sean más claros y los oscuros más oscuros. Esto cambia la pantalla de forma similar al botón Contraste que puede encontrar en una televisión.

- Control deslizante Brillo.
  El control deslizante "Brillo" controla el brillo con el que aparecen los colores en la pantalla, haciendo que los colores claros sean más luminosos y los oscuros más oscuros. Esto cambia la pantalla de forma similar al botón Brillo que puede encontrar en una televisión.

- Control deslizante División de luminosidad.
  La División de luminosidad es la posición en el espectro de colores donde se dividen los colores claros y oscuros. Al mover el control deslizante hacia la izquierda, la mayoría de los colores del espectro estarán clasificados en el espectro más claro. Esto influye en los valores de contraste y brillo.

- Control deslizante Ajustar color.
  El control deslizante "Ajustar color" le permite realizar cambios generales en los colores de la pantalla con la excepción del blanco y el negro. Puede usar la paleta de colores para ver los cambios que se producen cuando mueve el control deslizante. Una posición del control deslizante del 0 % significa que los colores de la pantalla se mantienen sin cambios.

- Control deslizante Color.
  El control deslizante "Color" le permite controlar cuánto color hay en la pantalla. Al cambiar este valor, los colores se vuelven más claros o más intensos. Puede usar la paleta de colores para ver los cambios que se producen cuando mueve el control deslizante. Una posición del control deslizante del 50 % significa que los colores de la pantalla se mantienen sin cambios.

- Previsualice esta configuración de colores en esta casilla del cuadro de diálogo.
  Seleccione esta casilla para ver cómo se producen sus cambios a medida que los realiza.

16.9.2 Opciones de color personalizadas Matiz, Matiz dual, Matiz agudo y Matiz cuádruple:

- Casilla Invertir el brillo.
  Esta opción invierte el brillo de la pantalla, de modo que las pantallas habituales con elementos oscuros sobre fondo claro pasan a ser elementos claros sobre fondo oscuro. Esta opción no afecta la cantidad de colores de la pantalla.

- Control deslizante Contraste.
  El control deslizante "Contraste" controla la definición de color, haciendo que los colores claros sean más claros y los oscuros más oscuros. Esto cambia la pantalla de forma similar al botón Contraste que puede encontrar en una televisión.

- Control deslizante Brillo.
  El control deslizante "Brillo" controla el brillo con el que aparecen los colores en la pantalla, haciendo que los colores claros sean más luminosos y los oscuros más oscuros. Esto cambia la pantalla de forma similar al botón Brillo que puede encontrar en una televisión.

- Control deslizante División de luminosidad.
  La División de luminosidad es la posición en el espectro de colores donde se dividen los colores claros y oscuros. Al mover el control deslizante hacia la izquierda, la mayoría de los colores del espectro estarán clasificados en el espectro más claro. Esto influye en los valores de contraste y brillo. Al usar el Matiz cuádruple y el Matiz agudo, se encuentran disponibles controles deslizantes adicionales

de límites de contraste para definir el límite de los colores en los intervalos intermedios del color.

- Control deslizante Nivel.
  El control deslizante "Nivel" le permite controlar la intensidad del color del matiz que se aplica en la pantalla. Un valor del 100 % en el que el control deslizante está situado a la derecha, significa que los colores del matiz reemplazan completamente los colores actuales de la pantalla. Un valor del 25 % significa que los colores del matiz se mezclarán con los colores originales de la pantalla en una relación 25:75, que crea una pantalla con más tonos.

- Casillas de la lista de colores del matiz.
  Podrá elegir de uno a cuatro colores diferentes dependiendo de si ha elegido "Matiz", "Matiz dual", "Matiz agudo" o "Matiz cuádruple". Los colores que elige se convierten en los colores primarios del espectro de colores en relación con la División de luminosidad.

- Previsualice esta configuración de colores en esta casilla del cuadro de diálogo.
  Seleccione esta casilla para ver cómo se producen sus cambios a medida que los realiza.

16.9.3 Opciones de combinación de colores personalizada de reemplazo del color:

- Casilla Invertir el brillo.
  Esta opción invierte el brillo de la pantalla, de modo que las pantallas habituales con elementos oscuros sobre fondo claro pasan a ser elementos claros sobre fondo oscuro. Esta opción no afecta la cantidad de colores de la pantalla.

- Control deslizante Contraste.
  El control deslizante "Contraste" controla la definición de color, haciendo que los colores claros sean más claros y los oscuros más oscuros. Esto cambia la pantalla de forma similar al botón Contraste que puede encontrar en una televisión.

- Control deslizante Brillo.
  El control deslizante "Brillo" controla el brillo con el que aparecen los colores en la pantalla, haciendo que los colores claros sean más

luminosos y los oscuros más oscuros. Esto cambia la pantalla de forma similar al botón Brillo que puede encontrar en una televisión.

- Control deslizante División de luminosidad.
  La División de luminosidad es la posición en el espectro de colores donde se dividen los colores claros y oscuros. Al mover el control deslizante hacia la izquierda, la mayoría de los colores del espectro estarán clasificados en el espectro más claro. Esto influye en los valores de contraste y brillo.

- Casillas de la lista "De" y "A".
  Las casillas de la lista "De" y "A" le permiten reemplazar un color por otro. Use las casillas de la lista para hacer uno o varios reemplazos de color.

- Previsualice esta configuración de colores en esta casilla del cuadro de diálogo.
  Seleccione esta casilla para ver cómo se producen sus cambios a medida que los realiza.

16.10 Cuadro de diálogo Visual Highlighting Options (Opciones de realce visual)

Menú: Visual > Highlighting (Resaltado) > Settings (Configuración)

Puede hacer que los diferentes tipos de foco sean más fáciles de ver agregando un indicador que lo realce. Puede elegir el estilo, el color y el comportamiento del realce en el cuadro de diálogo "Opciones de realce".

Ficha Mouse

- Casilla de verificación Realzar el mouse.
  Seleccione esta casilla de verificación para encender el realce de este foco. Deseleccione esta casilla de verificación para apagar el realce de este foco.

- Grupo Mostrar.

- Use las opciones de configuración de "Forma" para cambiar la forma y la medida del realce.

- Utilice el cuadro de lista "Show" (Mostrar) para definir cuándo se verá el resaltado. Si selecciona "On hot key" (En tecla de acceso rápido), significa que controlará el resaltado con la tecla de acceso rápido de resaltados de foco; si selecciona "Dynamic tracking" (Seguimiento dinámico), significa que se verá el resaltado del mouse hasta que presione una tecla del teclado.

  - Grupo Efectos.
    Puede elegir distintas opciones de color. Dependiendo de la opción que elija, también puede controlar los colores y/o la transparencia.

Ficha Cursor.

- Casilla de verificación Realzar el cursor.
  Seleccione esta casilla de verificación para encender el realce de este foco. Deseleccione esta casilla de verificación para apagar el realce de este foco.

- Grupo Mostrar.

- Use las opciones de configuración de "Forma" para cambiar la forma y la medida del realce.
- Utilice el cuadro de lista "Show" (Mostrar) para definir cuándo se verá el resaltado. Si selecciona "On hot key" (En tecla de acceso rápido), significa que controlará el resaltado con la tecla de acceso rápido de resaltados de foco; si selecciona "Dynamic tracking" (Seguimiento dinámico), significa que se verá el resaltado del mouse hasta que SuperNova registre otro tipo de foco como, por ejemplo, el mouse.

  - Grupo Efectos.
    Puede elegir distintas opciones de color. Dependiendo de la opción que elija, también puede controlar los colores y/o la transparencia.

Ficha Línea.

- Casilla de verificación Realzar la línea.
  Seleccione esta casilla de verificación para encender el realce de este foco. Deseleccione esta casilla de verificación para apagar el realce de este foco.

- Grupo Mostrar.

- Use las opciones de configuración de "Forma" para cambiar la forma y la medida del realce.
- Utilice el cuadro de lista "Show" (Mostrar) para definir cuándo se verá el resaltado. Si selecciona "On hot key" (En tecla de acceso rápido), significa que controlará el resaltado con la tecla de acceso rápido de resaltados de foco; si selecciona "Dynamic tracking" (Seguimiento dinámico), significa que se verá el resaltado del mouse hasta que SuperNova registre otro tipo de foco como, por ejemplo, el mouse.

  - Grupo Efectos.
    Puede elegir distintas opciones de color. Dependiendo de la opción que elija, también puede controlar los colores y/o la transparencia.

Ficha Foco.

El término "Foco" hace referencia al foco usado en los cuadros de diálogo y menús.

- Casilla de verificación Realzar el foco.
  Seleccione esta casilla de verificación para encender el realce de este foco. Deseleccione esta casilla de verificación para apagar el realce de este foco.

- Grupo Mostrar.

- Use las opciones de configuración de "Forma" para cambiar la forma y la medida del realce.
- Utilice el cuadro de lista "Show" (Mostrar) para definir cuándo se verá el resaltado. Si selecciona "On hot key" (En tecla de acceso rápido), significa que controlará el resaltado con la tecla de acceso rápido de resaltados de foco; si selecciona "Dynamic tracking" (Seguimiento dinámico), significa que se verá el resaltado del mouse hasta que SuperNova registre otro tipo de foco como, por ejemplo, el mouse.

  - Grupo Efectos.
    Puede elegir distintas opciones de color. Dependiendo de la opción que elija, también puede controlar los colores y/o la transparencia.

16.11 Cuadro de diálogo visual Mouse Pointers (Punteros del mouse)

Menú: Visual > Mouse Pointers (Punteros del mouse)

Con SuperNova, dispone de varios punteros del mouse de mayor tamaño y más fáciles de ver que los que suele incluir Windows. Están disponibles en distintos colores y tamaños.

Opciones:

- Lista Scheme (Combinación).
  En esta lista, puede elegir una combinación de punteros del mouse ya existente. Si no le agrada ninguna combinación de las existentes, utilice las demás opciones para crear una combinación nueva o modificar una existente.

- Listas Type (Tipo) y Pointer Image (Imagen del puntero).
  La lista "Type" muestra los diversos punteros de Windows, y la lista "Pointer Image" (Imagen del puntero) muestra las diferentes imágenes que puede aplicar al tipo de puntero seleccionado. Para cambiar un puntero, seleccione el tipo de puntero y, a continuación, elija un puntero de entre las imágenes disponibles.

- Botón New (Nuevo).
  Al pulsar el botón "New" (Nuevo), se abrirá el cuadro de diálogo "Create New Scheme" (Crear combinación nueva). En este cuadro de diálogo, puede introducir un nombre nuevo para la combinación. El nuevo nombre de la combinación aparecerá en la lista "Scheme" (Combinación).

- Botón Restore to defaults (Restaurar valores predeterminados).
  Si ha modificado una combinación predeterminada de SuperNova, al seleccionar este botón, se volverá a aplicar la combinación de punteros predeterminada de SuperNova.

- Botón Delete (Eliminar).
  Si ha creado una combinación nueva, al pulsar este botón, se abrirá una ventana de mensaje para que confirme que desea eliminar la

combinación. Seleccione "Yes" (Sí) para eliminar la combinación, o "No" para cancelar.

- Grupo Custom pointer size (Tamaño de puntero personalizado).
  Las opciones de este grupo permiten ajustar el tamaño de los punteros del mouse de la combinación actual, para cambiar el tamaño predeterminado.

- Casilla de verificación Use custom pointer size (Utilizar tamaño de puntero personalizado).
  Si selecciona esta casilla de verificación, el valor de la lista "Size" (Tamaño) se aplicará a todos los punteros de la combinación actual.
- Lista Size (Tamaño).
  La lista "Size" (Tamaño) contiene un intervalo de los valores que puede aplicar a los punteros de la combinación actual. Puede elegir un tamaño fijo como, por ejemplo, 8, para que todos los punteros tengan 8 veces su tamaño original. Si se selecciona un valor fijo, los punteros seguirán teniendo el mismo tamaño, independientemente del tamaño del magnificador que haya definido. También puede elegir un valor relativo al grado de ampliación como, por ejemplo, 150%. Con los valores relativos, el tamaño del puntero se ajustará a medida que aumenta o disminuye el tamaño de ampliación. Con grados de ampliación muy altos, puede que el tamaño fijo del puntero ocupe demasiado espacio en la pantalla: en estos casos, es mejor seleccionar un tamaño relativo del puntero que sea menor que el tamaño original.
- Casilla de verificación Use custom pointer in magnified areas only (Usar puntero personalizado solo en zonas ampliadas).
  Si selecciona esta casilla de verificación, el tamaño personalizado del puntero se aplicará solamente en las zonas ampliadas. No se verá cuando desactive el Magnificador ni cuando vea la pantalla sin ampliar, en vistas como la de pantalla dividida.

16.12 Cuadro de diálogo visual Doc Reader Settings (Configuración del lector de documentos)

Menú: Visual > Doc Reader Settings (Configuración del lector de documentos)

Las opciones disponibles en el cuadro de diálogo "Doc Reader Settings" (Configuración del lector de documentos) sirven para controlar el entorno de lectura del lector de documentos. Para abrir este cuadro de diálogo,

puede seleccionar el elemento en el menú "Visual" o seleccionar el botón "Settings" (Configuración) en la barra de herramientas del lector de documentos.

Opciones:

- Configuración de fuente.
  En el lector de documentos, puede definir la fuente que se utilizará para mostrar el texto en la ventana del documento. También puede indicar el tamaño de fuente que se usará.

- Configuración de color.
  Puede definir los colores que se usarán en la ventana del documento. Hay tres categorías a las que puede aplicar también un color de primer plano y de fondo.

- Document colours (Colores del documento) establece los colores de fondo y de primer plano que se usan en la ventana del documento. Sin embargo, si está seleccionado "Use document colours" (Usar colores del documento), no se aplicará esta configuración.
- **Word highlight colours (Colores de resaltado de palabra)** establece los colores de fondo y de primer plano que utiliza el lector de documentos para el foco actual. Muestra la palabra seleccionada actualmente mientras el lector de documentos lee el documento. Sin embargo, si está seleccionado "Invert word" (Invertir palabra), no se aplicará esta configuración. En lugar de ello, el resaltado se invertirá en función de la configuración de color personalizada.
- **Unit highlight colours (Colores de resaltado de unidad)** establece los colores de fondo y de primer plano de la unidad de movimiento especificada. Es lo que se resalta al desplazar el cursor por un documento.

- Casilla de verificación Fetch whole document (Obtener todo el documento).
  Si la casilla de verificación "Fetch whole document" (Obtener todo el documento) está seleccionada, cargará todo el documento en el lector de documentos. Según el tamaño del documento, esto puede tardar unos segundos. Esta opción solo se admite en aplicaciones compatibles con DOM, como Microsoft Word, Adobe Acrobat Reader, Internet Explorer, el Bloc de notas, WordPad, etc.
  También se puede especificar el número de líneas que se desea

obtener desactivando la casilla de verificación "Fetch whole document" (Obtener todo el documento) y especificando el número de líneas con el control de rotación. Así podrá cargar una parte del documento con mayor rapidez.
Si trabaja con una aplicación que no es compatible con DOM, el lector de documentos cargará el contenido desde la pantalla actual.

- Casilla de verificación Invert word (Invertir palabra).
  Si se activa la casilla de verificación "Invert word" (Invertir palabra), el resaltado del foco estará invertido, en función de los colores del documento especificados o en función de los colores reales del documento, según el modo que esté activado.

- Casilla de verificación Use document colours (Usar colores del documento).
  Si se activa esta casilla de verificación, el lector de documentos usará los colores especificados en el documento en lugar de los colores personalizados.

- Casilla de verificación Use document styles (Usar estilos del documento).
  Si se selecciona esta opción, los estilos utilizados en el documento se mostrarán en el lector de documentos.

- Lista Wrap line to (Ajustar línea a).
  La opción "Wrap line to" (Ajustar línea a) se puede usar para insertar un salto de línea en una línea si sobrepasa una longitud concreta. Esto puede resultar útil si hay líneas que salen fuera de la ventana actual.
  Para desactivar esta función, establezca el valor 0 en "Wrap line to" (Ajustar línea a).

- Control deslizante Doc Reader speed (Velocidad del lector de documentos).
  El control deslizante "Doc Reader speed" (Velocidad del lector de documentos) define la velocidad de lectura del documento.

16.13 Cuadro de diálogo Configuración visual de Conectar y ver

Menú: Visual > Conectar y ver > Configuración

El cuadro de diálogo "Configuración de Conectar y ver" contiene opciones que puede usar para cambiar la forma en la que SuperNova funciona con una cámara y una pizarra.

Ficha General.

- Controles de la ventana Conectar y Ver

- Lista Posición
  De forma predeterminada, la ventana Conectar y ver aparece en la mitad superior de la pantalla. Sin embargo, puede acoplar la ventana Conectar y ver en la parte superior, inferior, izquierda o derecha de la pantalla. O bien, puede configurar la ventana Conectar y Ver para que ocupe toda la pantalla.
- Lista Tamaño
  Puede configurar la ventana Conectar y ver acoplada para que ocupe el 80 %, el 50 % o el 20 % del área de la pantalla.
- Lista En monitor
  Al utilizar varios monitores, puede seleccionar en qué monitor aparece la ventana Conectar y Ver.
- Casilla de verificación Permitir que el mouse se mueva libremente entre la ventana Conectar y ver y el escritorio
  La desactivación de esta opción ayuda a evitar el movimiento accidental del puntero del mouse dentro o fuera de la ventana Conectar y ver.
- Control deslizante Resistencia
  Con "Permitir que el mouse se mueva libremente entre la ventana Conectar y ver y el escritorio" habilitado, puede agregar un nivel de resistencia del mouse al intentar traspasar el borde de la ventana con este control deslizante. Cuanto mayor es el nivel, mayor es la resistencia, lo que significa que es necesario mantener el puntero del mouse en el borde de la ventana durante más tiempo para desplazarse de una ventana a otra.

- Guardar las capturas de pantalla de Conectar y Ver en: (botón Examinar)
  Esta opción permite seleccionar la carpeta donde se guardan las imágenes de captura de pantalla de Conectar y ver.

- Lista Cambiar la tecla de acceso rápido de la ventana Conectar y ver
  Los botones Agregar y Quitar permiten redefinir la tecla de acceso rápido predeterminada de SuperNova, BLOQ MAYÚS + BOTÓN CENTRAL DEL MOUSE, para el cambio hacia y desde la ventana Conectar y Ver.

Ficha Cámaras.

- Lista de dispositivos y controles
  Utilice esta lista para seleccionar una cámara que usar con SuperNova. Establezca el valor en "Desactivado" si desea evitar la selección de una cámara cuando cambie de dispositivo. Utilice el botón "Ajustes" para optimizar el rendimiento de la cámara. Estas opciones variarán entre los distintos modelos de cámara. Dispone de las siguientes opciones:

- Lista Resolución
  Muestra las resoluciones disponibles para la cámara conectada. El aumento de la resolución debería mejorar la calidad de imagen mostrada en el visor.
- Lista Velocidad de fotogramas
  Se enumera como fotogramas por segundo (FPS). El FPS más alto significa que las imágenes que cambian con frecuencia aparecen más suaves, mientras que el FPS más bajo puede reducir la cantidad de oscilación detectada de la cámara, lo que puede proporcionar una mejor experiencia de lectura de documentos.
- Lista Antiparpadeo
  Esta lista incluye 50 Hz, que normalmente se selecciona para Europa y el Reino Unido, y 60 Hz para América y Japón. Si selecciona los Hz correctos, se eliminará el parpadeo causado por la iluminación fluorescente que puede interferir con la imagen de la cámara.
- Casilla de verificación Enfoque automático.
  Si ve que el enfoque automático realiza esta acción con regularidad, es

posible que desee desactivar esta función. No todas las cámaras incluyen la función de enfoque automático. SuperNova solo hará que la casilla de verificación Enfoque automático esté disponible si la cámara admite esta función.

- Lista Esquema de color
  Utilice esta opción para aplicar una combinación de colores predeterminada al visor de la cámara. También hay opciones adicionales disponibles en el visor de la cámara para controlar el ajuste Esquema de color.

- Usar la casilla de verificación Zoom del hardware de la cámara
  Utilice esta opción para activar el zoom óptico de hardware para las cámaras que lo admiten (en lugar del zoom digital). Esto da como resultado una imagen aumentada mejorada.

- Usar la casilla de verificación Cambiador de color de la cámara
  Utilice esta opción para activar las opciones de cambio de color del hardware para las cámaras que la admiten (en lugar de cambio de color de software).

- Casilla de verificación Mejorar colores de alto contraste
  Utilice esta opción para aumentar el contraste de las imágenes visualizadas mientras utiliza uno de los esquemas de color incorporados de SuperNova. (Esta opción es especialmente útil cuando se visualizan páginas que contienen texto y diagramas).

- Casilla de verificación Congelar imagen automáticamente
  Utilice esta opción para eliminar los "puntos de baile" (también conocidos como ruido "sal y pimienta" o ruido "impulsivo") de la secuencia de vídeo de la cámara (especialmente útil en entornos con poca iluminación).

Ficha Pizarras.

- Lista de dispositivos y controles.
  Utilice esta lista para crear, editar o eliminar un perfil de dispositivo. Establezca el valor en "Desactivado" si desea evitar cambiar a un dispositivo de pizarra. Utilice el botón "Nuevo" para crear un nuevo perfil. Utilice el botón "Configuración" para editar un perfil. Las siguientes opciones adicionales están disponibles al crear o editar un perfil:

- Cuadro Perfil.
  Utilice este cuadro para asignar un nombre significativo al dispositivo. Una posibilidad es asignar al dispositivo un nombre relacionado con la clase, el profesor o el instructor, por ejemplo, para facilitar su selección en el futuro. Tenga en cuenta que las opciones restantes de este cuadro de diálogo pueden requerir información de un administrador de red.
- Cuadro Nombre de la máquina.
  Utilice este cuadro para introducir el nombre del equipo host tal y como aparece en la red. Como alternativa, también puede introducir la dirección IP del equipo host; sin embargo, esto no se recomienda debido a la asignación dinámica de direcciones IP en la mayoría de las configuraciones de red.
- Cuadro Puerto.
  De forma predeterminada, Virtual Network Computing (VNC) utiliza el puerto 5900. Solo debe cambiar esta configuración si el administrador de red le indica que debe hacerlo.
- Cuadro Contraseña.
  Utilice este cuadro para introducir la contraseña que le permite conectarse al equipo host. La asignación de una contraseña es opcional y se establece en el software de VNC. Su administrador de red podrá proporcionarle esta información.
- Botones de opción Tipo de conexión.
  Utilice estos controles para seleccionar la opción que coincida con su tipo de conexión de red. Puede elegir entre una conexión de red de área local (LAN) y una conexión inalámbrica.
- Lista Protocolo.
  Hay una serie de protocolos RFB (Remote Frame Buffer) disponibles que son compatibles con VNC. Solo debe cambiar esta configuración si el administrador de red le indica que debe hacerlo.
- Casilla de verificación Ver el mouse.
  Utilice esta configuración para controlar si el puntero del mouse en el equipo host aparece en el visor. Es posible que desee activar esta opción si desea ver la posición del puntero del mouse en la pantalla. Es posible que desee desactivar esta opción si la presencia del puntero del mouse le resulta una distracción.

Las opciones adicionales del cuadro de diálogo "Configuración de Conectar y ver" son ajustes generales y se aplican a todas las interacciones de la pizarra, independientemente del dispositivo elegido.

- Lista Esquema de color.
  Utilice esta opción para aplicar una combinación de colores predeterminada al visor de la pizarra. También hay opciones adicionales disponibles en el visor de la pizarra para controlar el ajuste Esquema de color.

- Casilla de verificación Seguir la posición del presentador en la pizarra.
  Utilice esta opción para controlar el seguimiento del enfoque en el equipo host. La desactivación de esta opción significa que el usuario controla el movimiento alrededor de la ventana. Puede desplazarse por la ventana utilizando el puntero del mouse o realizando una panorámica por la pantalla con el teclado.

16.14 Cuadro de diálogo Visual > Varios monitores

Menú: Visual > Varios monitores

Puede definir las opciones para varios monitores en el cuadro de diálogo Varios monitores.

Para usar varios monitores, SuperNova requiere conectar una tarjeta gráfica a la placa base del equipo (como puede ser una tarjeta AGP/PCI o PCIe). Los adaptadores de tarjeta gráfica USB no son compatibles.

Opciones:

- Grupo Modo de visualización del escritorio ampliado.
  Con las opciones de este grupo puede elegir la configuración más adecuada para los equipos en los que el escritorio se ha extendido a monitores adicionales.

- Botón de opción Extender.
  Seleccione esta opción si desea usar dos monitores que funcionen como uno solo más grande. En este caso, un solo escritorio se extenderá a lo largo de ambos monitores.

- Botón de opción Aplicaciones en paralelo.
  Puede utilizar este modo para visualizar diversas aplicaciones en los diferentes monitores. Al usar las aplicaciones en paralelo, pueden resultar útiles las siguientes teclas de acceso rápido:

Función	Tecla de acceso rápido
Mover el cursor del ratón al centro del monitor siguiente	BLOQ MAYÚS + BOTÓN CENTRAL DEL MOUSE
Mover aplicación al monitor derecho	Tecla logotipo de WINDOWS + MAYÚS + FLECHA DERECHA
Mover aplicación al monitor izquierdo	Tecla logotipo de WINDOWS + MAYÚS + FLECHA IZQUIERDA

- Casilla de verificación Modo de presentación.
  Puede utilizar esta opción para que un monitor muestre una pantalla ampliada y todos los demás monitores una pantalla sin ampliar. Esto permite, por ejemplo, trabajar en una pantalla ampliada mientras que el público, que ve una presentación de diapositivas en el segundo monitor, ve la pantalla sin ampliar.

  - Casilla de verificación Búfer del ratón.
    Con esta opción puede impedir los movimientos accidentales del puntero del mouse en otro monitor si usa un escritorio extendido. Para ello debe crear un grado de resistencia en el borde de la pantalla, lo que significa que deberá ejecutar los movimientos con mayor fuerza si desea mover el puntero a otro monitor. Para ajustar el grado de resistencia creado por el búfer, use el control deslizante "Resistencia".

  - Control deslizante Resistencia.
    Con este control deslizante puede controlar la resistencia del mouse creada por el búfer. Cuanto mayor es el nivel, mayor resistencia, lo que significa que es necesario mantener el puntero del mouse en el

borde de la pantalla durante más tiempo para que pase a otro monitor.

- Lista de teclas de acceso rápido para cambiar de monitor.
  Si trabaja con aplicaciones en paralelo en un escritorio extendido, tal vez desee cambiar rápidamente el puntero del mouse al siguiente monitor, sin aplicar el Magnificador fuera del área de la pantalla que está viendo actualmente. Para ello, puede utilizar la tecla de acceso rápido para cambiar de monitor. La combinación de teclas predeterminada para ello es BLOQ MAYÚS + BOTÓN CENTRAL DEL MOUSE.

- Botones Agregar tecla, Sustituir tecla y Quitar tecla.
  Con estos botones puede cambiar la tecla de acceso rápido "Cambiar monitor".

- Casilla de verificación Permitir diferentes tipos de ampliación en cada monitor.
  Esta opción le permite tener niveles independientes del Magnificador en cada uno de sus monitores. Esto resulta útil, por ejemplo, cuando tiene dos monitores de diferentes tamaños y necesita un ligero aumento adicional en el monitor más pequeño o cuando aumenta texto más pequeño en una aplicación en uno de sus otros monitores.

- Casilla de verificación Colores independientes.
  Esta opción le permite tener combinaciones de colores independientes en cada uno de sus monitores. Esto resulta útil, por ejemplo, cuando tiene aplicaciones en cada monitor que requieren diferentes ajustes de color para facilitar su visualización.

Cuando hace que el nivel del Magnificador y los colores de SuperNova sean independientes, en el panel de control de SuperNova, el número de monitor al que pertenecen el nivel del Magnificador y la configuración de color se mostrará en la hoja de propiedades "Visual" (directamente debajo del control de la medida del Magnificador).

(No olvide que también puede hacer que su configuración de SuperNova sea específica de la aplicación).

16.15 Cuadro de diálogo Opciones visuales avanzadas

Menú: Visual > Opciones avanzadas

Puede especificar la configuración de varias características de SuperNova seleccionando opciones en el cuadro de diálogo "Opciones visuales avanzadas".

Ficha Preferencias generales

- Realce el grupo Acción de las teclas de acceso rápido.
  Se pueden definir diferentes formas para los realces visuales. Una de estas formas es mostrar los realces seleccionados cuando se presiona una tecla de acceso rápido. El cuadro de lista "Mostrar realce" determina el comportamiento de las teclas de acceso rápido. Se puede definir en "Hasta nueva pulsación de la tecla de acceso rápido" o "Hasta que se suelte la tecla de acceso rápido".

- Grupo Ampliación decimal.
  La casilla de verificación "Permitir la ampliación decimal" determina si los aumentos de la medida de ampliación incluirán o no valores decimales. Si se apaga la ampliación decimal, no cambiará nada inmediatamente. El factor cambiará al factor lineal más cercano únicamente después del siguiente ajuste de la ampliación.
  Si tiene dificultades al utilizar medidas decimales de la ampliación, puede utilizar las opciones disponibles para intentar mejorar los resultados.

- Grupo Modo de visión global.
  La configuración de este grupo determina cómo se muestra la posición del Ampliador en la pantalla cuando se establece el Modo de visión global. Se puede invertir el área ampliada o el fondo. Las opciones de configuración de este grupo también determinan el comportamiento de la tecla de acceso rápido del Modo de visión global. Se puede definir en "Hasta nueva pulsación de la tecla de acceso rápido" o "Hasta que se suelte la tecla de acceso rápido".

- Botón Compatibilidad con vídeo.
  Este botón abre el cuadro de diálogo "Compatibilidad con vídeo". El cuadro de diálogo contiene varias casillas de verificación que le permiten optimizar la velocidad de la ampliación y solucionar los errores de pantalla provocados por controladores de vídeo incompatibles.

- Casilla de verificación Búfer del mouse.
  Cuando la casilla de verificación "Búfer del mouse" está activada, se evita el movimiento accidental del puntero del mouse hacia o desde la ventana del visor Conectar y ver cuando la casilla de verificación "Permitir que el puntero del mouse se mueva entre la ventana de la cámara y el escritorio" está activada. Para conseguirlo, debe crear un grado de resistencia en el borde de la ventana, lo que significa que deberá ejecutar los movimientos con mayor fuerza si desea mover el puntero a la otra ventana. Para ajustar el grado de resistencia creado por el búfer, use el control deslizante "Resistencia".

- Control deslizante Resistencia.

- Con este control deslizante puede controlar la resistencia del mouse creada por el búfer. Cuanto mayor es el nivel, mayor es la resistencia, lo que significa que es necesario mantener el puntero del mouse en el borde de la ventana durante más tiempo para desplazarse de una ventana a otra.

Pestaña "Magnifier" (Ampliador).

- Casilla de verificación "Lock Aspect" (Bloquear aspecto).
  Si la casilla de verificación "Lock Aspect" no está marcada, tendrá dos controles de botones de número con los que puede ajustar independientemente el tamaño de ampliación horizontal y vertical. Si vuelve a encender el índice de bloqueo de aspecto, el factor de ampliación cambiará al valor medio de los factores horizontal y vertical. Tenga en cuenta que no podrá utilizar fuentes True Type si los tamaños de ampliación vertical y horizontal son diferentes.

- Grupo Suavizado de fuentes.
  El suavizado de fuentes mejora la legibilidad del texto de la pantalla al utilizar la ampliación. Algunas de las opciones:

- Botón de opción Ninguno.
  Seleccione "Ninguno" para desactivar el suavizado de fuentes.
- Botón de opción Estándar.
  Seleccione "Estándar" para utilizar el suavizado de fuentes básico. Elija esta opción si tiene problemas de funcionamiento al utilizar fuentes True Type.
- Botón de opción Fuentes True Type.
  Seleccione "Fuentes True Type" para que la claridad sea perfecta en todas las medidas de ampliación. Si utiliza un monitor LCD o una medida de ampliación de 3x o inferior, puede resultarle útil experimentar con la configuración de fuentes True Type.

  - Grupo Configuración de fuentes True Type.

- Botón de opción Estándar.
  Si utiliza "Estándar", el texto se visualizará sin alisar. Es el método predeterminado y también el más rápido, especialmente, al utilizar medidas de ampliación de 4x o superiores.
- Botón de opción Alisado.
  Esta configuración presenta el texto alisando los bordes. Si observa irregularidades al utilizar fuentes True Type con medidas de ampliación pequeñas, seleccione esta opción.

Puede cambiar entre los modos "Ninguno", "Estándar" y "Fuentes True Type" mediante una tecla de acceso rápido de SuperNova.

Teclas de acceso rápido del Magnificador

Función	Ordenador de sobremesa: conjunto de teclado numérico predeterminado	Portátil: conjunto universal
Suavizado de fuente	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 8	Sin asignación

Las fuentes True Type no estarán disponibles si utiliza una relación de ampliación diferente en sentido vertical y horizontal. Para cambiar de forma independiente las medidas de ampliación vertical y horizontal, anule la

selección de la casilla de verificación "Bloquear aspecto" en el cuadro de diálogo "Opciones visuales avanzadas".

Ficha Seguimiento.

- Grupo Seguimiento del mouse.
  En este grupo, la casilla de verificación "Seguir puntero del mouse" determina si SuperNova sigue o no el puntero del mouse. Con el seguimiento del mouse, la ventana se desplaza cuando el mouse se sale del marco del mouse. La distancia que recorre suele ser lo necesario para que el mouse termine en el borde de la pantalla o el margen. Para ajustar el marco del mouse, presione el botón de marco del mouse. Se abrirá el cuadro de diálogo Marco del mouse y los focos.
  La casilla de verificación "Desplazar el puntero del mouse a la vista" determina qué ocurre cuando el puntero del mouse no está visible dentro de la ventana magnificada. Cuando esta opción está seleccionada, al mover inicialmente el puntero del mouse, éste es colocado en el centro de la ventana magnificada. En caso contrario, es la ventana magnificada la que se mueve hasta la posición del puntero del mouse en la pantalla.
  Si se selecciona la casilla de verificación "Permanecer en la ventana", se crean unos límites artificiales para el mouse alrededor de la ventana seleccionada en ese momento. Estos límites imponen una restricción al puntero del mouse de modo que la imagen mostrada difícilmente se sale de la ventana actual. Estos límites se eliminan cuando el puntero excede los bordes de la ventana.
  La casilla de verificación "La tecla MAYÚS bloquea el desplazamiento del mouse horizontal o verticalmente", cuando está habilitada, hace que la panorámica de la vista ampliada a se bloquee completamente horizontal o verticalmente mientras se mantiene presionada la tecla MAYÚS (en función de la dirección inicial del movimiento del mouse). Al soltar la tecla MAYÚS, el movimiento del mouse vuelve a la normalidad.

- Grupo Seguimiento del cursor.
  La casilla de verificación "Seguimiento del cursor" determina si el Ampliador sigue al cursor en haz dentro de las áreas de edición. Si se selecciona esta casilla, la ventana magnificada se mueve para mostrar el área alrededor del cursor según se va moviendo. El marco del cursor (la distancia mínima entre el haz y el borde de la pantalla)

se puede definir en el cuadro de diálogo Marco de intercalación presionando el botón Marco de intercalación.

- Grupo Seguimiento del foco.
  En este grupo, se controla si el Ampliador seguirá o no otros tipos de controles de Windows. Las opciones disponibles son menús, controles y ventanas.
  La casilla de verificación "Mantener foco en el centro" determina si los controles que se siguen, como pueden ser menús y cuadros de diálogo pequeños, se deben centrar en la ventana magnificada si caben. Si no se selecciona "Mantener foco en el centro", el área visualizada se mueve lo mínimo imprescindible para que el objeto quede completamente visible.
  La casilla de verificación "Seguimiento del narrador" controla si el resaltado de enfoque del Narrador de Windows se rastrea cuando se ejecuta el Narrador. (Requiere Windows 10 compilación 17763 o superior).

La ficha Vista de líneas.

Vista de líneas es un modo de lectura de SuperNova. En este modo, el contenido de la pantalla visible se muestra en una única línea que ocupa toda la ventana. La vista de líneas permite determinar el color del fondo y del texto, el tamaño del texto y la fuente utilizada.

La ficha Áreas enlazadas.

Las áreas enlazadas permiten que una determinada área de la pantalla esté siempre visible. Así, puede ver la información más importante, que cambia a menudo a medida que se utiliza la aplicación.

16.15.1 Ficha de mejora

Ficha de mejora

- Grupo Mejora de la fuente.
  La casilla de verificación "Fuentes True Type negrita" añade la opción de negrita a texto magnificado con fuentes True Type.
  La casilla de verificación "Estándar negrita" añade la opción negrita a texto magnificado sin fuentes True Type, como el texto que se

encuentra en el menú de inicio de Windows 10 y en el panel de contenido de Google Chrome y Mozilla Firefox.
Los botones de opción "Bajo", "Medio" y "Alto" controlan la cantidad de negrita añadida al texto magnificado.

- Grupo Mejora de la imagen.
  La casilla de verificación "Refinar la nitidez" controla si SuperNova refina la nitidez de las imágenes magnificadas (incluidas las fotografías), así como de los textos sin fuentes True Type.
  Si la casilla de verificación "Refinar la nitidez" está habilitada, SuperNova refinará la nitidez de imágenes magnificadas y de texto sin fuentes True Type exagerando la diferencia del brillo a lo largo de cualquier borde de la pantalla, lo que hace que los bordes tengan un aspecto más pronunciado. El proceso de refinamiento de la nitidez funciona quitando una versión ligeramente borrosa de la imagen de la pantalla original para detectar la presencia de bordes, por tanto, creando lo que se conoce como "máscara". Con esta máscara, el contraste a lo largo de los bordes detectados se aumenta de manera selectiva dejando una imagen más nítida.
  El control deslizante "Contraste" controla la diferencia de nitidez mínima del brillo. Esto se puede utilizar para refinar la nitidez de los bordes más pronunciados, mientras que se dejan los bordes sutiles sin tocar. Es especialmente útil para evitar refinar la nitidez del ruido.
  El control deslizante "Medida" controla la medida de los bordes que desee mejorar, teniendo en cuenta que una medida más pequeña mejora los detalles más pequeños. Por lo general, deseará realizar un ajuste de medida que sea comparable a la medida del detalle más pequeño de su imagen. La clave para refinar de manera eficaz la nitidez es encontrar la configuración correcta para hacer que los bordes tengan un aspecto suficientemente pronunciado a la vez que se minimizan las "aureolas".

Note: Las opciones Estándar negrita y Refinar la nitidez no están disponibles en Windows 7.

16.16 Cuadro de diálogo Preferencias de inicio generales

Menú: General > Preferencias de inicio

Puede especificar la configuración de varias funciones de SuperNova con las opciones del cuadro de diálogo Preferencias de inicio. La disponibilidad de algunas opciones depende del sintetizador que esté utilizando y de si ejecuta una versión local, de red o USB de SuperNova.

Opciones

- Casilla de verificación Launch SuperNova after logon (Ejecutar SuperNova al iniciar sesión).
  Puede hacer que el ordenador ejecute automáticamente SuperNova al iniciar sesión con su cuenta de usuario, seleccionando esta casilla de verificación.

- Casilla de verificación Disable splash screen at startup (Deshabilitar la pantalla de presentación al inicio).
  Puede evitar que aparezca la pantalla de presentación de SuperNova, seleccionando esta casilla de verificación. La pantalla de presentación es una imagen que aparece mientras se carga un programa de ordenador.

- Casilla de verificación Magnifier at user logon (Magnificador en el inicio de sesión del usuario).
  Puede ampliar la pantalla de inicio de sesión de Windows, seleccionando esta casilla de verificación. Si selecciona esta casilla de verificación, la próxima vez que reinicie el ordenador, aparecerá una barra de herramientas de SuperNova en la pantalla de inicio de sesión de Windows. Puede hacer clic con el mouse en los botones de la barra de herramientas para ajustar la ampliación, o presionar F7 para reducir la ampliación y F8 para ampliarla.

  Nota: solo se puede utilizar la ampliación en la pantalla de inicio de sesión de Windows si se ejecuta un componente de SuperNova como servicio de Windows. No se pueden ejecutar programas completos en la pantalla de inicio de sesión de Windows, por las restricciones de seguridad de Windows.

- Casilla de verificación Show magnification buttons at logon (Mostrar botones de ampliación en el inicio de sesión).
  Puede ocultar la barra de herramientas de SuperNova que aparece en la pantalla de inicio de sesión de Windows, anulando la selección de este elemento.

- Casilla de verificación Guardar siempre la configuración de usuario.
  De manera predeterminada, SuperNova guardará los cambios realizados en la configuración de SuperNova. Puede evitar este comportamiento deseleccionando la casilla de verificación "Guardar siempre la configuración de usuario". Si esta casilla de verificación no está seleccionada, los cambios realizados deberán guardarse de manera manual. Para hacerlo, seleccione la opción "Guardar configuración" del menú "Archivo".

-

- Casilla de verificación Preguntar al usuario.
  La casilla de verificación "Preguntar al usuario" está disponible cuando se deselecciona la casilla de verificación "Guardar siempre la configuración de usuario". Si selecciona la casilla de verificación "Preguntar al usuario, SuperNova le preguntará si desea guardar los cambios realizados cuando salga de SuperNova.

16.17 Cuadro de diálogo Configuración de actualización general

Menú: General > Configuración de actualización

El cuadro de diálogo "Configuración de actualización" define cuándo SuperNova debe comprobar si hay actualizaciones automáticamente. SuperNova puede realizar la búsqueda a diario, cada semana, cada mes o nunca.

También puede mantener SuperNova actualizado seleccionando "Comprobar actualizaciones" desde el menú "Ayuda".

16.18 Cuadro de diálogo Panel de control general

Menú: General > Panel de control

El cuadro de diálogo "Panel de control" contiene la configuración global para controlar la interfaz de usuario de SuperNova.

- Lista Idioma del sistema de acceso.
  Este cuadro de lista le permite cambiar el idioma del sistema de SuperNova. Esto incluye todo el texto del panel de control de SuperNova, el idioma de salida del sintetizador y los archivos de ayuda.

- Casilla de verificación Habilitar advertencias útiles
  Esta casilla de verificación enciende o apaga la característica de advertencias útiles. Un ejemplo de advertencia útil es la preparación de gráficos: si presiona la tecla de acceso rápido para la preparación de gráficos, pero ésta está desactivada, se mostrará una advertencia.

- Casilla de verificación Habilitar mensajes de Ayuda.
  Se pueden mostrar mensajes de ayuda que le sirvan de guía para tareas concretas. Si la casilla de verificación no está activada, no se mostrarán estos mensajes. También se puede deshabilitar mensajes de ayuda concretos cuando se muestran; para ellos, se debe desactivar la casilla de verificación "No volver a mostrar este mensaje" de la ventana del mensaje.

- Casilla de verificación Usar la configuración predeterminada en el panel de control.
  De forma predeterminada, usará la configuración actual de SuperNova cuando se desplace por el panel de control de SuperNova. De este modo puede ver el efecto de los cambios en la configuración a medida que se producen.
  Es posible que, en ocasiones, la configuración que desea usar en la aplicación no sea adecuada para el panel de control de SuperNova. Si selecciona esta casilla de verificación, SuperNova usará la configuración predeterminada de la aplicación y no su configuración personalizada para la aplicación.

- Casilla de verificación Ocultar cuando esté minimizado.
  Puede evitar que el panel de control de SuperNova se muestre en la barra de tareas y en el cuadro de diálogo "Cambiar a" seleccionando esta casilla de verificación.
  Podrá seguir accediendo al panel de control de SuperNova con la tecla de acceso rápido "Abrir Panel de control" o a través de la bandeja del sistema.

- Botones de opción de estilo Barra de menús y Barra de botones.
  Puede hacer que se muestre el panel de control de SuperNova sólo como una barra de menús o como una barra de menús y una barra de botones. El estilo de barra de botones incluye botones gráficos grandes a través de los que puede acceder fácilmente a las opciones de configuración principales de SuperNova.

- Casilla de verificación Barra de estado.
  Puede ocultar la barra de estado que forma parte del panel de control de SuperNova deseleccionando esta casilla de verificación.
  La barra de estado contiene información sobre la aplicación y el archivo de configuración que se usan en ese momento. Todos los cambios que realice en el panel de control se aplican a este archivo de configuración.

- Casilla de verificación Siempre visible.
  Si esta opción está habilitada, el panel de control de SuperNova estará siempre visible sobre otras ventanas.

- Botones de opción Iniciar con el panel...
  Puede controlar el aspecto del panel de control de SuperNova cuando se inicia SuperNova. Puede configurar el panel de control para que esté visible, minimizado o se muestre en la misma posición en la que estaba la última vez que cerró SuperNova.

16.18.1 Tema del Panel de Control

- Lista de temas del Panel de Control.
  Este cuadro de lista le permite cambiar los colores que se visualizan en el Panel de Control de SuperNova permitiéndole seleccionar un cierto número de esquemas de color predeterminados. El ajuste predeterminado es "System Colours" (Colores del sistema), que hace

que SuperNova use los colores de su esquema de color actual de Windows.

16.19 Cuadro de diálogo General Keyboard (Teclado general)

Menú: General > Keyboard and Hot Keys (Teclado y teclas de acceso rápido) > Keyboard (Teclado)

Puede especificar la disposición del teclado y el conjunto de teclas de acceso rápido que desea utilizar en el cuadro de diálogo "Keyboard" (Teclado).

Opciones:

- Lista Teclado.
  El cuadro de lista "Teclado" define el tipo de teclado. No tiene que ser un reflejo real del teclado que está usando.

- Lista Idioma.
  El cuadro de lista "Idioma" debe coincidir con la presentación del teclado de Windows. El valor hace referencia a Anuncio de teclado y a las asignaciones de las teclas de acceso rápido.

- Lista Conjunto.
  En el cuadro de lista "Conjunto" se especifica el conjunto de teclas de acceso rápido que se va a usar. Los conjuntos disponibles están limitados por las opciones seleccionadas en las listas "Teclado" e "Idioma".

- Botón Restaurar teclas de acceso rápido predeterminadas.
  Puede restaurar los cambios que haya realizado en un conjunto de teclas de acceso rápido seleccionando este botón.

- Casilla de verificación Num Lock On enables Number Pad keys (Bloq Num activado permite utilizar las teclas numéricas).
  Puede introducir números con el teclado numérico, seleccionando esta casilla de verificación. Si selecciona esta opción, desactive el bloqueo numérico para utilizar las teclas de acceso rápido de SuperNova que usan el teclado numérico.

16.20 Cuadro de diálogo Teclas de acceso rápido generales

Menú: General > Teclado y teclas de acceso rápido > Teclas de acceso rápido

Puede agregar, sustituir o quitar asignaciones de teclas de acceso rápido para los comandos de SuperNova, utilizando las opciones del cuadro de diálogo "Teclas de acceso rápido". La lista de comandos incluye los comandos globales. Las teclas de acceso rápido definidas en los mapas y las secuencias de comandos no se pueden cambiar con este cuadro de diálogo.

También puede establecer más de una tecla modificadora Dolphin; por ejemplo, puede configurar tanto las teclas INSERTAR como INSERTAR TECL NUM para que sean la tecla modificadora de Dolphin.

También puede establecer una tecla modificadora de Dolphin secundaria. Esto le permite asignar un comando diferente a la misma tecla, por ejemplo, la tecla modificadora de Dolphin principal de INSERTAR TECL NUM + FLECHA ABAJO puede ser el principio de Leer desde aquí, mientras que BLOQ MAYÚS + FLECHA ABAJO puede ajustar la ampliación.

La opción "Al pulsar dos veces la tecla Dolphin, funciona como la tecla real" le permite evitar el cambio accidental de tecla modificadora de Dolphin (por ejemplo, BLOQ MAYÚS) cuando se utiliza como modificador. Cuando esta opción está seleccionada, debe presionar la tecla dos veces para cambiar su estado.

Para obtener más información acerca de la modificación de teclas de acceso rápido, consulte los temas de "Resolver conflictos de teclas de acceso rápido" en esta guía del usuario.

16.21 Cuadro de diálogo Configuración general de pantalla táctil

Menú: General > Configuración de pantalla táctil

El cuadro de diálogo Configuración de pantalla táctil contiene opciones para ajustar la experiencia táctil de SuperNova.

Ficha General

- Control deslizante Tiempo de espera de pulsación doble
  Esta opción controla el tiempo que debe transcurrir entre la primera y la segunda pulsación para que el gesto se considere una acción de doble pulsación. Para aumentar el tiempo que debe transcurrir entre ambas pulsaciones, mueva el control deslizante hacia la derecha.

- Control deslizante Margen de vibración
  El margen de vibración es el recorrido que puede realizarse desde un toque inicial antes de que SuperNova considere que se está realizando un movimiento de deslizamiento. Para aumentar el recorrido permitido, mueva el control deslizante hacia la derecha.

Ficha Magnificador

- Casilla de verificación Mostrar barra táctil
  La barra táctil de SuperNova es una barra táctil de herramientas que aparece en la parte inferior de la pantalla al realizar una pulsación sencilla con 3 dedos. Al igual que con este gesto, también puede controlar el aspecto de la barra táctil ajustando el estado de esta casilla de verificación.

- Control deslizante Inercia de deslizamiento
  Al realizar un solo deslizamiento con el dedo, la pantalla ampliada se mueve por inercia. Cuanto más rápido realice el deslizamiento, más rápido se moverá la pantalla ampliada de SuperNova. Este control deslizante determina el grado de resistencia que SuperNova aplica al movimiento. Para reducir el nivel de resistencia, mueva el control deslizante hacia la derecha.

- Control deslizante Ancho de área de desplazamiento automático
  El ancho de área de desplazamiento automático es la distancia que debe mantener el dedo respecto al borde de la pantalla antes de que SuperNova comience a desplazar de forma automática el resto de la pantalla de la vista. Para aumentar el tamaño del margen, mueva el control deslizante hacia la derecha.

- Control deslizante Velocidad del área de desplazamiento automático
  La Velocidad del área de desplazamiento automático establece el

tiempo que tarda SuperNova en iniciar automáticamente el desplazamiento cuando un dedo entra en la zona de desplazamiento automático. Para aumentar la velocidad de desplazamiento automático, mueva el control deslizante hacia la derecha.

- Control deslizante Tiempo de espera de paso a través
  El tiempo de espera de paso a través es el tiempo que debe transcurrir antes de que una presión se considere un gesto de paso a través.

- Casilla de verificación Desplazar aplicaciones automáticamente
  Esta opción controla si un gesto de deslizamiento debe desplazar de forma automática el contenido de una ventana de aplicación, si la ventana ampliada se encuentra en el borde de la pantalla. Por ejemplo, si se está leyendo una página web, la ventana ampliada se encuentra en la parte inferior de la pantalla y se realiza un deslizamiento, la página web se desplazará automáticamente para incluir contenido nuevo en la vista. Entre las aplicaciones compatibles con esta característica se encuentran la pantalla Inicio, Internet Explorer, Adobe Reader y Microsoft Word.

Ficha Teclado en pantalla

- Casilla de verificación Abrir automáticamente en aplicaciones de escritorio
  SuperNova muestra automáticamente el teclado en pantalla si es necesario escribir y no se ha conectado ningún teclado al dispositivo. Deseleccione esta opción para desactivar la aparición automática del teclado en pantalla en las aplicaciones de escritorio. Aunque desactive esta opción, puede hacer aparecer el teclado en cualquier momento. Para ello, pulse el botón Teclado de la barra táctil de SuperNova o del área de notificación de Windows.

- Lista Esquema de color
  Si lo desea, puede elegir otro esquema de color de esta lista para cambiar el aspecto del teclado en pantalla de SuperNova. Los esquemas de color disponibles ofrecen combinaciones de colores de alto contraste y gran tamaño para facilitar la visualización del teclado.

16.22 Cuadro de diálogo Opciones generales avanzadas

Menú: General > Opciones avanzadas

Puede especificar la configuración de varias características de SuperNova seleccionando opciones en el cuadro de diálogo "Opciones generales avanzadas".

Ficha Configuración del sistema

- Botón Configuración de Windows.
  SuperNova realiza algunos cambios en el sistema para mejorar la accesibilidad. Puede deshabilitar cualquier cambio realizado seleccionando este botón para abrir el cuadro de diálogo "Configuración de Windows" y deseleccionando cualquier elemento de la lista.

Ficha Configuración de detección

- Casilla de verificación Permitir asignación remota.
  Puede habilitar la asignación remota seleccionando esta casilla de verificación. De este modo, los equipos que ejecutan la utilidad de formación remota de Dolphin pueden conectarse con su equipo.
  Por razones de seguridad, si enciende esta opción, ésta se apagará automáticamente cuando salga de SuperNova.

- Casilla de verificación Leer en forma encolumnada.
  Puede organizar la pantalla en columnas según el sistema de detección interno de SuperNova seleccionando esta casilla de verificación. Esto influye en las opciones de lectura de SuperNova en las áreas que no tienen un modelo de objeto de documentos (DOM).

16.23 Cuadro de diálogo Buscador de elementos

Menú: General > Buscador de elementos

El Buscador de elementos se puede utilizar para enumerar determinados objetos en una ventana de la aplicación. A continuación, puede seleccionar los objetos y realizar acciones con ellos. Por ejemplo, puede incluir la

acción de hacer clic en un vínculo de una página Web o desplazarse a un encabezado de un documento.

Puede utilizar el Buscador de elementos en programas, como Microsoft Office e Internet Explorer.

Si se encuentra en una aplicación que no admite el Buscador de elementos, este se deshabilitará.

Para obtener más información acerca del Buscador de elementos y su utilidad para su aplicación, consulte la ayuda de SuperNova disponible para su aplicación.

Índice

A

Abrir el último libro que se ha leído, 53

Abrir un archivo en EasyReader:, 51

Abrir un libro de una biblioteca en línea, 52

Acciones, 81

Activar y desactivar el Magnificador, 13

Adquirir una cámara y un soporte adecuados, 56

Ajustar la posición y el tamaño del visor, 58

Ajustar la sensibilidad táctil, 76

Ajuste de la ventana del magnificador, 87

Ajustes en el Panel de Control SuperNova, 10

Alternar entre el zoom digital y el óptico, 63

Ampliador, 13

Ampliar la imagen en el visor, 60, 69

Archivos de configuración, 45

B

Barra táctil de SuperNova, 75

Bloquear la imagen, 64, 71

Buscador de elementos, 93

C

Cambiar el archivo de mapas, 47

Cambiar el aspecto del panel de control de SuperNova, 11

Cambiar el color, la fuente y los items mostrados en la vista de líneas., 35

Cambiar entre el visor y el escritorio, 57, 68

Cambiar la medida del Magnificador, 14

Cambiar la medida y la posición de la ventana magnificada, 16

Cambiar la Vista de Magnificador, 15

Cambiar los colores de la imagen, 62, 70

Capturar imagen del visor, 65, 72

Cerrar el panel de control de SuperNova, 11

Comandos de teclado del lector de SuperNova, 53

Comandos de teclado para desplazarse por el panel de control de SuperNova, 8

Conectar y ver, 55

Conectar y ver cámara, 55

Conectar y ver pizarra, 65

Conectarse al equipo del presentador, 66

Configuración de la cámara, 65

Configuración de pizarra, 72

Configurar su estación de trabajo, 56

Conflictos de teclas de acceso rápido, 77

Controlar el enfoque automático, 63

Controlar la lectura, 38

Crear un área enlazada utilizando el ratón, 25

Crear un área enlazada utilizando el teclado, 23

Crear una configuración de aplicación, 45

Crear una configuración de situación, 46

Crear ventanas magnificadas estáticas para mostrar información, 22

Cuadro de diálogo Buscador de elementos, 136

Cuadro de diálogo Configuración de actualización general, 129

Cuadro de diálogo Configuración general de pantalla táctil, 133

Cuadro de diálogo Configuración visual de Conectar y ver, 115

Cuadro de diálogo Edit Application Settings (Editar configuración de aplicación), 102

Cuadro de diálogo Edit Map (Editar mapa), 103

Cuadro de diálogo Edit Situation Settings (Editar configuración de situación), 102

Cuadro de diálogo General Keyboard (Teclado general), 132

Cuadro de diálogo New Application Settings (Nueva configuración de aplicación), 100

Cuadro de diálogo New Map (Mapa nuevo), 100

Cuadro de diálogo New Situation Settings (Nueva configuración de situación), 99

Cuadro de diálogo Opciones generales avanzadas, 136

Cuadro de diálogo Opciones visuales avanzadas, 122

Cuadro de diálogo Panel de control general, 130

Cuadro de diálogo Preferencias de inicio generales, 128

Cuadro de diálogo Teclas de acceso rápido generales, 133

Cuadro de diálogo Visual > Varios monitores, 119

Cuadro de diálogo visual Configurar combinación de colores personalizada, 104

Cuadro de diálogo visual Doc Reader Settings (Configuración del lector de documentos), 112

Cuadro de diálogo Visual Highlighting Options (Opciones de realce visual), 108

Cuadro de diálogo visual Mouse Pointers (Punteros del mouse), 111

D

Desactivación de las teclas de acceso rápido de SuperNova, 77

Desplazar el texto en la vista de líneas, 34

E

Ejecutar SuperNova por primera vez, 5

Elemento del menú Edit Script (Editar secuencia de comandos), 104

Elemento del menú New Script (Nueva secuencia de comandos), 101

Eliminar un área enlazada utilizando el teclado, 25

Encender el visor, 57, 67

Escribir en una pantalla táctil, 75

F

Facilitar la visualización del foco, 30

Facilitar la visualización del puntero, 31

Ficha de mejora, 126

G

Gestos de pantalla táctil, 74

Guardar cambios de configuración, 47

H

Hacer un seguimiento del movimiento del presentador, 71

I

Indicar a SuperNova que debe ignorar la siguiente pulsación de tecla, 77

Iniciar el lector de documentos, 37

Iniciar la vista de líneas, 33

Iniciar SuperNova, 5

Instalación y configuración, 5

Introducción al panel de control de SuperNova, 7

L

Lector de documentos, 37

Libros de la Estantería, 51

M

Magnificador, 82

Media (Multimedia), 51

Mejora de la calidad de imagen, 62

Mejorar la visualización de la pantalla, 29

Mejoras de la pantalla, 29

Modificar un área enlazada utilizando el teclado, 24

Modo invitado y Modo de emergencia, 41

Mostrar u ocultar áreas enlazadas, 27

Mostrar y ocultar la barra de herramientas del visor, 59, 68

P

Panel de control de SuperNova, 7

Pantalla táctil, 73

R

Reasignar una tecla de acceso rápido de SuperNova, 78

Referencia, 99

Rotar la imagen en el visor, 61

S

Salir de SuperNova, 5

Salir del lector de documentos, 39

Seleccionar la cámara en SuperNova, 56

T

Teclas de acceso rápido, 81

Teclas de acceso rápido por capas, 94

Teclas de desplazamiento rápido para Microsoft Word, 93

Teclas de exploración rápida, 94

Tema del Panel de Control, 131

Terminología de la pantalla táctil, 73

U

Usar su cámara con SuperNova, 57

V

Ver el equipo del presentador, 67

Ver otras partes de la imagen, 61, 70

Ver otras partes de la pantalla, 18

Visión global de la posición de la ventana magnificada, 22

Vista de líneas, 33, 90

Z

ZoomText para la guía de terminología del producto SuperNova, 97